

Handleiding **KANMED** BABYBED



CE

Art. nr.: BB100-402-075 ver 7
2023-11-17



Waarschuwing

Lees deze handleiding zorgvuldig.
Foutief gebruik kan letsel aan patiënt
of gebruiker veroorzaken.

Geproduceerd door:
KANMED AB
www.kanmed.se

Gedistribueerd door:

Deze handleiding is van toepassing op alle Kanmed Babybedjes die geleverd zijn vanaf januari 2017

Inhoudsopgave

1 ALGEMENE BESCHRIJVING / BEOOGD GEBRUIK.....	3
2 WAARSCHUWINGEN	3
3 VERKLARING VAN DE SYMBOLEN	4
4 GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE.....	5
5 CLEANING	9
6 PERIODIEKE VEILIGHEIDSCONTROLES VOOR GEBRUIK	10
7 PROBLEEMOPLOSSING	10
8 TECHNISCHE GEGEVENS	11
9 TECHNISCH GEDEELTE – SERVICE EN ONDERHOUD	12
10 RESERVEONDERDELEN / ACCESSOIRES	14
11 GARANTIEVERKLARING	15
12 EMC-RICHTLIJNEN	16

BB101 Standard without rails BB100 Standard with rails BB400 Twin Version with rails



BB102 Standaard met metalen rails



1 Beoogd gebruik

Beoogd gebruik


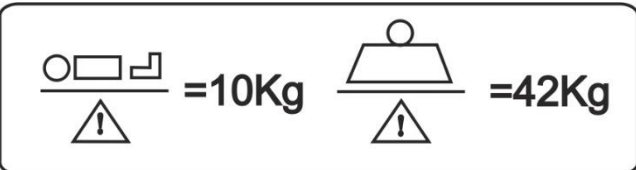









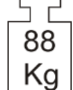

Het Kanmed BabyBed is bestemd als ergonomisch en veilig bedje dat ideaal is voor premature en pasgeboren baby's in een ziekenhuisomgeving. Het bedje kan tevens worden gecombineerd met de Kanmed BabyWarmer BW3 of BW-50.

Het babybedje dient door het ziekenhuispersoneel of de verzorger van de baby te worden gebruikt volgens de instructies in deze handleiding en volgens de door u ingevoerde klinische routines. Alleen personen die zijn getraind in het gebruik van het Kanmed BabyBed mogen het product gebruiken.

2 Waarschuwingen

- Gebruik het Kanmed BabyBed niet voor baby's/kleine kinderen die uit zichzelf uit het bedje kunnen vallen/klimmen.
- Zorg ervoor dat de zijwanden in de hoogste stand zijn vergrendeld als de baby onbewaakt in het bedje ligt
- Verplaats het bedje niet als het zich in de hoogste stand bevindt. Verplaats het bedje altijd in de laagste bedstand.
- Gebruik de zijwanden niet om het bedje te verrijden. Pak het bedje hierbij altijd aan de zijranden vast of het voorste handgreep
- Laat de baby niet onbewaakt achter met de zijwanden omlaag.
- Neem de maximale draagkracht van het bedje in acht.
- Controleer of alle wielen en bouten stevig zijn vastgezet en of het bedje niet wankel staat.
- Zorg ervoor dat er geen personen of voorwerpen in de weg staan als u de hoogte van het bedje verstelt.
- Verwijder de paal voor het hemeltje als het bed zonder hemeltje wordt gebruikt.
- De paal voor het hemeltje mag alleen voor het hemeltje worden gebruikt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als kinderen, familieleden, patiënten of patiënten met bijzondere behoeften het voetpedaal per ongeluk kunnen indrukken of met het voetpedaal kunnen spelen. Zorg ervoor dat de Kanmed BabyWarmer van stroom blijft voorzien.
- Zet het bedje op een veilige afstand van andere voorwerpen die in hoogte kunnen bewegen.
- De maximale dikte van het matras is 40 mm.
- Alleen personen die zijn getraind in het gebruik van het Kanmed BabyBed mogen het product gebruiken.

3 Verklaring van de symbolen

	Lees de handleiding voor gebruik.		
Modellen beschikbaar:			
BB100	Standard BabyBed	BB101	Zelfde maar zonder rails
BB400	BabyBed for Twins	BB401	Zelfde maar zonder rails
BB300	Standard BabyBed fixed height	BB301	Zelfde maar zonder rails
BB400F	BabyBed for twins with fixed height	BB401F	Zelfde maar zonder rails
BB102	Standaard Babybed met metalen rails	BB402	Twin Babybed met metalen rails
Maximaal toegestane veilige werkbelasting:			
			
<p>Bedlade voor alle uitvoeringen: Gewicht van baby('s) 10 kg totaal + watermatras(sen), gelmatrassen of overige matrassen, totaal 10 kg</p> <p>Opbergdoos met deksel onder het bedplateau: 2 kg</p> <p>Opbergdoos onder het bedplateau: 2 kg</p> <p>Zijranden rond het bed: Max. 3,5 kg aan iedere rand. Max. 10 kg aan alle randen samen</p> <p>Plank: 5kg. Achter mount kit polen: 3 kg per stuk</p> <p>Voorste handvat: 5 kg (modellen zonder side rails)</p>			
	Symbool op voetpedaal voor het omhoog en omlaag bewegen van het bedplateau (niet voor BB300/301 en BB400/401F)		
	Symbool voor kantelfunctie, te vinden op het label van de bedlade		
	Voldoet aan EU 2017/745 (MDR) en 2011/65/EU (RoHS).		
	Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is.		
	Aansluitpunt voor potentieelvereffening		
IP 30	Beschermingsgraad (tegen indringing van water en vreemde voorwerpen)		
	Beschermingsgraad Type B (Body) (niet voor BB300/301 / BB400F, 401F)		
	Als het Kanmed BabyBed het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het (indien van toepassing) te worden geretourneerd aan uw distributeur voor recycling volgens EU-richtlijn 2002/96/EG (AEEA).		
	Fabricagejaar		Maximaal aantal minuten non-stopgebruik van de elektrische zuil
20XX		9min/h	
	Totaalgewicht van het bedje wanneer belast met max. toegestaan gewicht		
88 Kg			
	Risico van handletsel		

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Eerste reiniging

Het Kanmed BabyBed en accessoires, maar dienen voor gebruik te worden gereinigd volgens de geldende ziekenhuisroutines.

Raadpleeg het gedeelte **Reiniging** voordat u het bedje in gebruik neemt.

Zie gedeelte 5 voor het monteren van de zijwanden, etc

4.2 Stabiliteitscontrole

Controleer of alle bouten en schroeven stevig zijn aangedraaid en of het bedje stabiel aanvoelt.

4.3 Zijwanden laten zakken

De zijwanden en voorwand kunt u op de volgende manier laten zakken:


Pak de bovenranden met *beide* handen vast.

Omhoog trekken (5mm, ¼ inch) – naar u toe trekken (2 cm, 1 inch) – en voorzichtig omlaag drukken.

Trek de zijwand met beide handen weer omhoog – trek de wand een beetje naar voren en druk de wand daarna omlaag. Zorg ervoor dat de zijwanden stevig op hun plaats zitten. Controleer of alle zijwanden soepel bewegen en in goede conditie zijn.

OPMERKING: Controleer of er niets beklemd raakt wanneer u de zijwanden omhoog en omlaag beweegt.

OPMERKING: Verwijderen van de zijwanden – zie gedeelte **Reiniging**

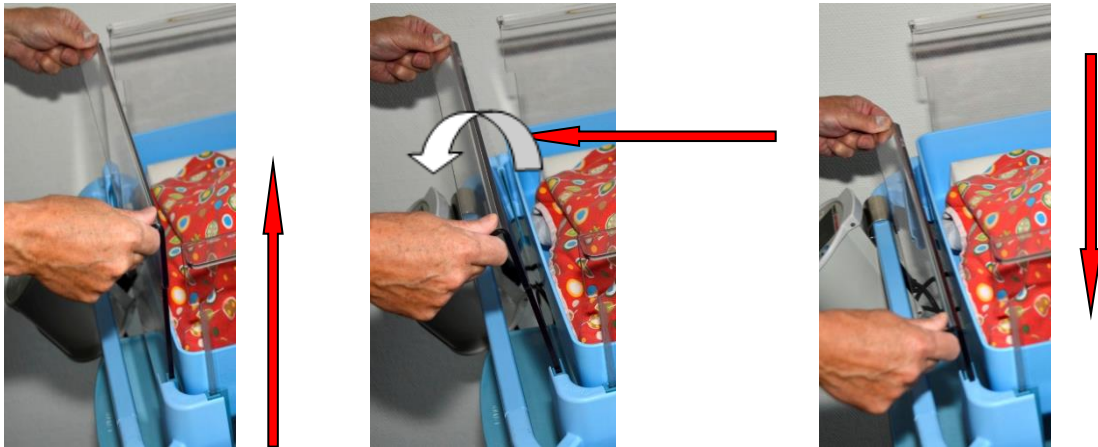

4.4 Het bedje verplaatsen

Houd altijd de zijranden vast om het bedje (of het voorste handvat) te verplaatsen.

Waarschuwing: Verplaats of vervoer het bedje altijd op lage hoogte, vooral als er een baby in het bedje ligt.

OPMERKING:

- Gebruik de zijwanden niet om het bedje te verrijden.
- Koppel voor verplaatsing van het bedje alle kabels los.
- Zet het bedje op de wielremmen als het stilstaat.

4.5 Het BabyBed aansluiten op de netspanning

(Niet voor BB300 / 301 en BB400F / 401F)

Het BabyBed moet op een geaard stopcontact worden aangesloten met behulp van een aardpotentiaalkabel. Leg de kabel zo dat niemand hierin verstrikt kan raken of over de kabel kan struikelen.

OPMERKING: De enige manier om de stroom te onderbreken is door de kabel uit de zuil of uit het stopcontact te verwijderen.

Plaats het bedje zo dat de stroomkabel eenvoudig kan worden verwijderd.

WAARSCHUWING: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, dient u deze apparatuur alleen aan te sluiten op een geaard stopcontact.



4.6 Hoogte verstellen


(niet voor BB300/301 en BB400/401F)

De hoogte van het bedje kan worden veresteld door het voetpedaal op de wielbasis in te drukken.

Schakel de stroom in en beweeg het bedje omhoog en omlaag om te controleren of het soepel beweegt zonder dat het vreemde geluiden maakt.

De motor is hoorbaar als indicatie/waarschuwing dat het bedplateau wordt bewogen.

Pedalen kunnen worden gemonteerd aan de linker of rechter zijde of aan beide kanten. Voorzijde pedaal is ook beschikbaar.

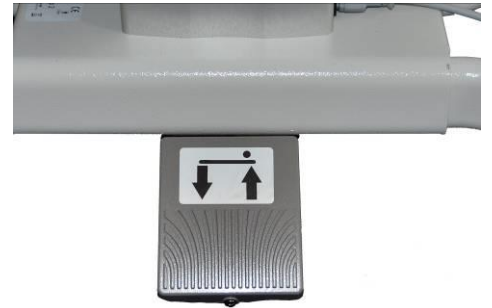

WAARSCHUWING:


Zorg er tijdens de hoogteverstelling voor dat de beweging niet wordt belemmerd door personen, kabels of andere voorwerpen. Controleer ook of er geen kabels klem of tussen de zuil en de wielbasis (of elders) gewikkeld zitten. *Denk twee keer na en druk één keer!*

Haal de stekker uit het stopcontact als er risico bestaat dat kinderen, familieleden of patiënten per ongeluk het voetpedaal kunnen indrukken. Zorg ervoor dat de Kanmed BabyWarmer van stroom blijft voorzien.

Blokkeer de beweging van het bed niet als de elektrische hoogteverstelling is geactiveerd.

4.7 Kantelen

Houd tijdens het kantelen van het bedje de voorste ail of handle stevig met beide handen vast. Druk op de ontgrendelingsknop onder de rechterhoek omhoog. Druk tegelijkertijd het bedje omhoog of omlaag tot de gewenste stand is bereikt. Laat de ontgrendeling los. De max. kantelhoek kan door een monteur worden ingesteld. Zie Technisch gedeelte.

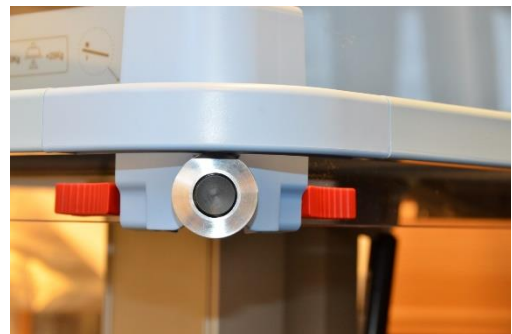

Tilt ontgrendelingsknop op modellen met zijrails



Tilt ontgrendelknop op modellen zonder zijrails

4.8 Paal voor hemeltje, hemeltje en matras

Bevestig de paal voor het hemeltje in de achterste beugel. Draai de paal in een hoek van 90 graden ten opzichte van het bed en druk hem omlaag, zodat de schroeven in de groeven vallen. Het hemeltje is aan de binnenzijde voorzien van een speciale opening. Laat de paal in deze opening glijden om het hemeltje vast te zetten en drapeer de zijkanten van het hemeltje om de zijwanden van het bedje heen. Plaats het matras in het bedje. Kanmed is niet verantwoordelijk voor het gebruik van andere matrassoorten en zelfgemaakte hemeltjes.




NB: De tent pole heeft 2 hoogte posities. Zorg ervoor dat u de juiste tentstok gebruiken.




4.9 Bedlade

Door de bedlade los te maken, kunt u deze eruit tillen voor eenvoudige reiniging en ook voor reiniging van de bedbodem.

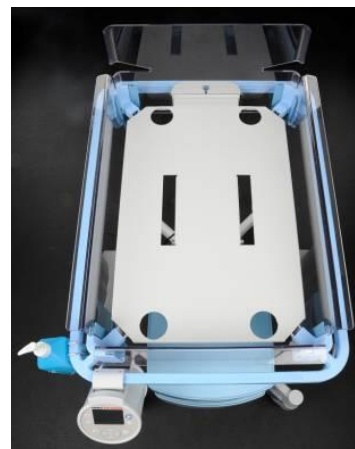

4.10 Opbergdozen

De opbergdozen kunnen met of zonder deksel onder het bedplateau worden bevestigd. Ze kunnen zijdelings worden weggedraaid, zodat ze eenvoudig te bereiken zijn. Draai de opbergdozen na gebruik weer terug op hun plaats. Houd de maximale belasting die op het deksel en in de opbergdozen staat vermeld in acht.

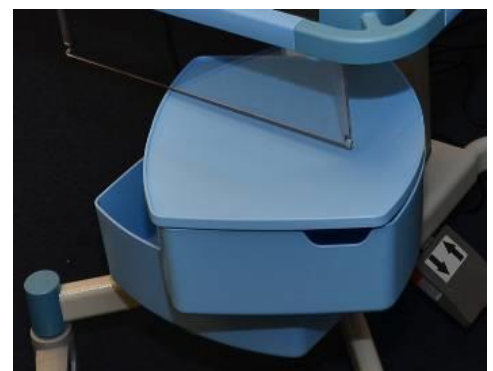

4.11 Kanmed BabyWarmer

De Kanmed BabyWarmer-comtol-unit wordt normaal gesproken, met behulp van de verstelbare beugel, op de geleidestang onder het bed geplaatst.

Er zijn andere manieren om de Kanmed BabyWarmer unit aan het bed te monteren.

Zie www.kanmed.se, BabyBed, Downloads. Het document wordt "Mogelijke manieren ..."

De kabel van het warmtekussen dient bij voorkeur door een van de gaten in de bedlade te worden gevoerd en op het bedieningspaneel te worden aangesloten.

.

.

4.12 BabyWarmer power cable

De Kanmed BabyWarmer wordt aangesloten op de netspanning met behulp van zijn eigen kabel of met een speciale korte kabel (bestelnummer 800-0502) en aangesloten op de bovenkant van de zuil (zie afbeelding). Raadpleeg de handleiding bij de Kanmed BabyWarmer voor meer informatie over het gebruik van de Kanmed BabyWarmer



4.13 Rear Mount Kit

Alle nieuwere bedjes worden geleverd met een bevestiging beugel. Buizen zijn standaard 25 diameter oestvrij stalen buizen.

Paaltjes met schroeven zijn accessoires. Ze zijn standaard roestvr

Bestelnummers zijn te vinden in hoofdstuk 10

Max gewicht op elke pool: 3 kg



4.14 Optioneel Plank

Een metalen plank kan worden besteld in plaats van de Storage Boxes

Art no: 800-0530 met 3cm hoge randen foto rechts

Art no:800-0540 met 5cm hoge randen



4.12 Overige accessoires

Kanmed-accessoires dienen te worden bevestigd en gebruikt volgens de aanwijzingen bij deze toebehoren.

Houd hierbij het maximaal toegestane gewicht (zie gedeelte 3) in acht.

Bij toevoeging van overige accessoires dient zorgvuldig rekening te worden gehouden met de max. draagkracht, geschiktheid, bevestiging aan het bedje, etc.

Kanmed is alleen verantwoordelijk voor de door Kanmed geleverde accessoires.

Voor Kanmed-accessoires, zie www.kanmed.se of neem contact op met uw leverancier

5 Reiniging

Algemene informatie

Het bed en de accessoires dienen tussen het gebruik door minstens goed te worden gereinigd. Volg de routines van de persoon die binnen uw ziekenhuis en afdeling verantwoordelijk is voor reiniging en desinfectie.

Controleer voor en na reiniging alle onderdelen op slijtage en conditie.

Hieronder volgt een lijst met reinigings- en desinfectiemiddelen die door Kanmed worden aanbevolen. (Overmatig) gebruik van andere middelen kan de levensduur van sommige of alle onderdelen inkorten.

Neem bij twijfel contact op met Kanmed en houd daarbij de productspecificatie bij de hand.

De zijwanden zijn gemaakt van (volledig recyclebaar) polyethyleentereftalaat (PET) en zijn bestand tegen alle soorten reinigings- en desinfectievloeistoffen.

Gebruik geen bleek- of oplosmiddelen.

Reiniging: Reinig met water en zeep

Desinfectie: Het Kanmed BabyBed is bestand tegen de meest voorkomende oppervlaktedesinfectiemiddelen die in ziekenhuizen worden gebruikt. Desinfectiedoekjes met Virkon®, Diversey Limpiador Colorado, Clinell-doekjes, Chlor Clean-doekjes, Meliseptol® Rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® Pur, Perform® en gelijksoortige middelen.

Probeer bij twijfel het middel op een klein oppervlak uit of neem contact op met uw leverancier of Kanmed.

SPECIFIEKE INFORMATIE

5.1 Reiniging van het bed

Gebruik hiervoor goed uitgewrongen doeken.

OPMERKING: Het Kanmed BabyBed mag in geen geval worden overgoten met vloeistoffen.

Reinig het bed niet in sterilisatiekamers.

5.2 Reiniging van de bedlade

De bedlade staat normaal gesproken los op het bedplateau. Hij kan daarom eenvoudig worden verwijderd om tegelijk met het bedplateau te worden gereinigd.

5.3 Reiniging van de zijwanden

Druk op de rode stoppers binnen aan de zijkant te ontgrendelen zijwanden en til hem op. en til de zijwand op.

Druk op de rode stop naar buiten om de zijwand te vergrendelen.

Reinig de zijwanden niet in een vaatwasser.

Wrijf de zijwanden niet schoon met een schurend materiaal.



5.4 Terugplaatsen van de zijwanden

Schuif de zijwanden zijn plaats en druk op de rode stoppers naar buiten.

Gevouwen bovenrand van de zijwand moeten naar buiten worden geconfronteerd.

5.5 Opbergdozen en deksels

De opbergdozen en deksels worden op dezelfde manier als het bed gereinigd en gedesinfecteerd.

5.7 Matras

Gebruik hiervoor een door Kanmed aanbevolen oppervlaktereïniger en -desinfectant (zie hierboven).

5.8 Hemeltje

Zie label voor wasinstructies.

In het geval van besmetting mag het hemeltje op 90°C worden gewassen. Dit kan echter leiden tot krimpen en vroegtijdige slijtage.

6 Periodieke veiligheidscontroles voor gebruik

Algemeen

Controleer of alle onderdelen in goede conditie zijn en geen verkleuring of scheurtjes vertonen.

Verwissel de onderdelen die niet in goede staat zijn.

Naast deze periodieke controles is jaarlijks onderhoud verplicht. Zie Technisch gedeelte.

Aanbevolen controles voor gebruik	Uitgevoerd door	Tijd-schema	Extra informatie
Functie van zijwanden	Gebruiker	Voor ieder gebruik	Controleer of de zijwanden soepel omhoog en omlaag bewegen en of ze in de hoogste stand vergrendeld kunnen worden.
Kantelfunctie	Gebruiker	Voor ieder gebruik	Controleer of het bedje ongehinderd kan worden gekanteld en stevig in de gewenste hoek kan worden vergrendeld.
Kabels en connectors	Gebruiker	Dagelijks	Controleer of ze in goede staat zijn.
Stabiliteit en integriteit	Gebruiker	Dagelijks	Controleer of het bedje in goede staat en stabiel is en of alle functies naar behoren werken.
Kanmed BabyWarmer	Gebruiker		Zie handleiding bij de Kanmed BabyWarmer.
Wielen/remmen	Gebruiker	Voor ieder gebruik.	

7 Probleemoplossing

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Handeling
De hefzuil beweegt niet naar wens (niet voor BB300,301 en BB400F,401F)	Geen netspanning	Controleer de kabels. Controleer het stopcontact
	De beweging wordt geblokkeerd	Controleer of er een blokkade is
	Elektrische verbinding defect of niet goed aangesloten	Technische dienst
	Voetpedaal defect of kabel niet aangesloten	Technische dienst
Het bedje kan niet goed worden gekanteld. Het blijft steken in de uiterste standen. Het bedje blijft niet in de gewenste stand staan	Bedieningspaneel is defect of moet worden bijgesteld	Technische dienst
	Het bedje wordt door iets geblokkeerd	Controleer of er een blokkade is
Het bedje voelt wankel aan	De schroeven of wielen zitten los	Technische dienst
De hoogteverstelling maakt vreemde geluiden		Technische dienst
De zijwanden kunnen niet goed worden bewogen	Niet goed vastgezet	Controleer of de zijwanden goed zijn vastgezet.

8 Technische gegevens

	BB100 / 101/102* Standaard BB300 / 301 vaste hoogte		BB400 / 401/402* Twin versie BB400F / 401F vaste hoogte	
Buitenafmetingen	Met bedrails L 85cm, W 63mm * met metalen rail B 58cm	Zonder bedrails L 83cm, W 53cm	Met bedrails L 95cm W 80 cm * met metalen rail B 76cm	Zonder bedrails L 93 cm W 70 cm
Buitenmaten	L850mm B630mm		L930mm B820mm	
Bedlade Binnenmaten	L690mm B465mm H90mm Gemaakt van PP		L765mm B640mm H90mm Gemaakt van PP	
Hoogte vanaf vloer tot onderkant bedlade	Min. 78 cm, max. 108 cm Vaste hoogte is 80 cm Bestellen van 9,5 cm dubbele wielen verlaagt alle bedden ongeveer 4 cm			
Gewicht	Circa 46 kg Vaste hoogte circa 36 kg		Circa 52 kg Vaste hoogte circa 42 kg	
Wielbasis	64 cm x 87 cm			
Wielen	Diameter 125 mm met remmen of 9,5 cm dubbele wielen met rem			
Kantelgraad	Circa 17 graden		Circa 17 graden	
Matras	Zacht schuim met coating		Zacht schuim met coating	
Hemeltje	Wasbaar op 60°C (90°C)		Wasbaar op 60°C (90°C)	
Opbergdoos	L320mm B330mm H120mm, Deksel 320x330 mm			
Kleur	Alle plastic details uniseks lichtblauw Wielen en metalen onderdelen lichtgrijs			
Voltage BB100/400	230V 50Hz / 60Hz of 115V 60Hz 150VA			
Zekeringen BB100/400	2 x T6,3A 230V. Vervang deze alleen door hetzelfde type zekeringen met hetzelfde nominale vermogen			
Stopcontact op zuil BB100/101/102/400/401/402: Max. 300W				
Bescherming BB100/101/102/400/401/402: Klasse I				

Wijzigingen WAARSCHUWING	Wijzigingen aan het Kanmed BabyBed, waaronder het gebruik van zelfgemaakte accessoires, ontslaan Kanmed volledig van haar verantwoordelijkheden en zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kanmed.
Aansluiting op andere systemen	Personen die het Kanmed BabyBed aansluiten op de hoofdvoeding van andere systemen, creëren daarmee mogelijk een systeem conform IEC 60601-1, sectie 16. Deze persoon dient over voldoende deskundigheid te beschikken om de gevolgen van deze aansluiting voor het welzijn van personeel, patiënten en apparatuur te overzien.
Verwachte levensduur	Kanmed garandeert een levensduur van 10 jaar met ingang vanaf de eerste dag van gebruik. Dit geldt als het Kanmed BabyBed volgens de gebruiksaanwijzing of de servicehandleiding wordt gebruikt en onderhouden en als de eenheid niet op enige wijze of om welke reden dan ook gemodificeerd of gewijzigd is.

Deze producten zijn CE-gemarkeerd.

Milieugegevens

In gebruik: +10 tot + 40°C, <85% RV
 Vervoer: -20 tot +60°C, niet-condenserend.
 Opslag: +10 tot +40°C, niet-condenserend.
 Atmosferische druk: 70 tot 106 kPa

9 Technisch gedeelte - Service en onderhoud

OPMERKING: Alle reserveonderdelen die voor vervanging of reparatie worden gebruikt, dienen door Kanmed of haar erkende leverancier te worden geleverd. Door gebruik van "niet door Kanmed toegestane onderdelen" komen alle verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid automatisch bij het ziekenhuis te liggen. Alleen gekwalificeerd personeel, biomedische technici of gelijkwaardig mogen reparaties uitvoeren. Voer geen onderhoud uit met een patiënt in bed.

9.1 Jaarlijkse controles / onderhoud

Controleer ten minste eenmaal per jaar:

- De kabels en connectors op defecten.
- De zijwanden op beschadigingen en scheurtjes.
- De hoeken op scheurtjes in het plastic of te vast aangedraaide schroeven. Let op: dit dienen speciale schroeven voor plastic te zijn.
- Controleer de geleiders van de zijwanden indien nodig voor het model bij de hand.
- Controleer of de zijwanden soepel omhoog en omlaag bewegen en eenvoudig op te tillen zijn.
- Controleer of het voetpedaal voor de hoogteverstelling zonder vertraging reageert, of de omhoog/omlaag-functie correct functioneert, of er tijdens de werking vreemde geluiden hoorbaar zijn en of de kabel onbeschadigd is.
- Controleer of de kantelfunctie correct functioneert. Hierbij mag geen geluid te horen zijn.
- Controleer of de draad naar de gasveer en kantelhendel onbeschadigd is.
- Controleer of de wielen stevig op het frame zijn vastgezet en onbeschadigd zijn, of ze geruisloos rollen en of de vergrendelfunctie van de wielen naar behoren functioneert.
- Controleer of alle schroeven stevig zijn aangedraaid, vooral de schroeven die de hefzuil met de wielbasis verbinden, de schroeven bovenop de zuil en de schroeven waarmee het bedplateau en de gasveer vastzitten.
- Controleer of het label op het voetpedaal versleten is.
- Controleer of de labels op de bedlade versleten zijn.

Service

OPMERKING

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact alvorens reparaties aan het BabyBed uit te voeren. Voer na reparatie altijd een volledige functietest uit.

9.2 Hydraulische ontgrendeling van de kantelfunctie

Bij bedden die zijn voorzien van een mechanische ontgrendeling van de kantelfunctie raadpleegt u versie 1 van deze handleiding voor meer service-informatie. Verkrijgbaar op www.kanmed.se. U kunt eenvoudig upgraden naar een hydraulische kantelfunctie. Neem hiervoor contact op met uw leverancier.

Door op de knop te drukken activeert u de ontgrendeling bovenop de gasveer in de ontgrendelingskop.

Als de kantelfunctie niet werkt of niet door de gasveer wordt geblokkeerd, dan moet u de functie instellen.

Ontgrendel de gaszuiger vanuit de beugel op de zuil en ontgrendel de borgmoer op de ontgrendelingskop (zie afbeelding)

Kantelhendel beweegt niet: Draai de gasveer één slag omlaag – plaats de gaszuiger in de beugel en druk de moer in.

Controleer of de hendel nu vrijelijk beweegt en goed vergrendelt wanneer de knop wordt vrijgegeven.

De kantelhendel vergrendelt niet: Draai de gasveer één slag omhoog en test de kantelfunctie.

Voer een laatste test uit en draai de bouten en borgmoer daarna vast.



9.2.1 Instellen van de kantellimiet

De kantellimiet kan worden begrensd door de houder van de gasveer op de zuil omlaag te bewegen. Zorg ervoor dat deze stevig wordt vastgezet.

Een kit is beschikbaar voor het kantelbereik modificeren kunnen het bed kantelen ± 17 graden

9.3 Wijzigen of aanpassen van een zijrail of -hoek

Zie de lijst met reserveonderdelen voor de onderdeelnummers. De zijrails zijn vanuit de onderzijde met twee (2) speciale plastic schroeven in iedere hoek vastgezet. De gaten in het bedje zijn ovaalvormig, zodat de zijrails hier stevig kunnen worden vastgeschroefd. Het is aan te raden de schroeven uit minimaal 2 hoeken te verwijderen alvorens nieuwe hoeken of zijrails te plaatsen.

Gebruik alleen Kanmed-schroeven met onderdeelnr. 700-0080, omdat andere schroeven niet sterk genoeg zijn. Een schroef kan circa 6 keer in hetzelfde gat worden in- en uitgedraaid.

9.4 Toevoegen, verwijderen of verplaatsen van de opbergdozen of planken

Draai de schroeven op de opbergdooshouder los (Indien nodig verwijdert u de zwarte decoratieve plastic streep). Plaats de houder in de nieuwe stand en draai de schroeven weer stevig vast.

Een dooshouder verwijderen of een extra houder toevoegen gaat als volgt:

Breng de zuil minimaal 5 centimeter omhoog. Druk het zwarte plastic frame rondom de onderkant van de zuil omlaag. Nu kunnen er bouten worden verwijderd of toegevoegd.

Nadat er extra opbergdozen zijn toegevoegd, moet u controleren of de voorste zijwand voldoende omlaag kan worden gebracht.

OPMERKING: De aluminium pen moet door de doos worden gevoerd alvorens hem met bouten op de beugel vast te zetten.

Snijdt de decoratieve zwarte plastic strepen te passen. Nieuwe strepen zijn te bestellen bij Kanmed.

9.5 Aanpassen van het voetpedaal/elektrische aansluitingen

Leg het bedje voorzichtig op zijn zijde. Verwijder het pedaal uit de zuil. Schroef het voetpedaal los en vervang het. Zet het bedje weer overeind. Controleer de werking van alle functies en of de pijlen omhoog/omlaag in de juiste richting wijzen.

Leg de Bed voorzichtig op zijn kant. Haal de stekker van het pedaal van de Pilaar. Schroef het voetpedaal en te vervangen. Hef het bed en controle functies en die omhoog / omlaag pijlen zijn juist aangeeft.

9.5 1 Het toevoegen van een extra voetpedaal of front voetpedaal.

Neem contact op met Kanmed voor de nodige instructies en onderdelen.

9.6 Demonteren van de zuil

Breng de zuil, indien mogelijk, circa 5 cm omhoog (met de elektrische bediening).

Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Maak het bedje leeg en verwijder de zijwanden en de bedlade.

Haal de opbergdozen weg. Druk het plastic frame onderaan de zuil omlaag. Verwijder de plastic strips, zodat de metalen pennen waarmee de accessoires aan de zuil zijn bevestigd, kunnen worden verwijderd. Als de zuil niet kan worden bewogen, moet u nieuwe metalen pennen bestellen.

Verwijder de gasveer met bijbehorende beugel uit de zuil.

Schroef de bouten waarmee het bedplateau vastzit los. Deze twee bouten worden aangedraaid slot en ze los te maken vereist kwaliteit gereedschappen en kracht.

Vergeet de aardingskabel niet.

Draai de bouten bovenop de zuil los om de bedbeugel te verwijderen. Let op de aardingskabel aan de onderzijde. Ontkoppel de hoogtevinstelling.

Keer de zuil/het bedje ondersteboven.

Schroef de bouten van de aarding los. (Op oudere modellen)

Verwijder de aardingskabel onder het bed. (Op oudere modellen)

Draai de schroeven onder de wielbasis los en verwijder het voetpedaal.

Schroef de zuil los. Let op de aardingskabel.

Om de zuil te monteren: Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit.

Controleer de werking van alle functies en voer een elektrische veiligheidstest uit om te controleren of het bedplateau voldoende geaard is.

10 Reserveonderdelen/accessoires

Art. No.	Product	Extra informatie
BB112	Onder bed BabyWarmer houder	Een kit compleet met instructies. Vereist een 7mm metaal boor bij bedjes voor 2018. Afhankelijk van specificatie single or twin bedje. BW3 vereist bracket holder BW3-0837.
800-0116	Side wall rear BB101/301/102	Hoogte 25cm. Bed zonder zijrails. Groeven voor kabels
800-0117	Side wall rear BB401/401F/402	Hoogte 29cm. Bed zonder zijrails. Groeven voor kabels vanaf boven.
800-0118	Side wall rear BB100/BB300	Hoogte 25cm. Groeven voor kabels .
800-0119	Side Wall rear BB400/400F	Hoogte 29cm. Groeven voor kabels .
800-0010	Side wall rear BB100/BB300.	Hoogte 29 cm, Groeven voor kabels
800-0105	Side wall rear BB101/BB301/102	Hoogte 25cm. Bed zonder zijrails. Groeven voor kabels
800-0042	Side Wall rear BB400/400F	Hoogte 29cm. Groeven voor kabels
800-0109	Side wall rear BB401/401F/402	Hoogte 25cm. Bed zonder zijrails. Groeven voor kabels
800-0077	Side wall left/right BB100/BB300	Hoogte 29 cm
800-0101	Side wall left/right BB101/BB301/102	Hoogte 25 Voor bedjes zonder zij rails
800-0079	Side wall left/right BB400/BB400F	Hoogte 29 cm
800-0107	Side wall left /right BB401/401F	Hoogte 25 Voor bedjes zonder zij rails
800-0076	Side wall front BB100/BB300	Hoogte 29 cm
800-0100	Side wall front BB101/BB301	Hoogte 25 Voor bedjes zonder zij rails
800-0078	Side wall front BB400/BB400F	Hoogte 29 cm
800-0108	Side wall front BB401/401F	Hoogte 25 Voor bedjes zonder zij rails
800-0072	Side wall stop red	Set van 4 st
800-0023	Side Rail front/rear BB100/BB300	Lengte 40 cm
800-0022	Side Rail sides BB100/BB300	Lengte 62 cm
800-0044	Side Rail front/rear BB400/BB400F	Lengte 57,7 cm
800-0045	Side Rail sides BB400/BB400F	Lengte 72,3 cm
800-0110	Corner BB100-400	Incl. 2 schroeven en afdekking onder handle. Voor bedjes MET zijrails.
800-0098	Corner Handle BB101-401	Incl. 2 schroeven. Voor bedjes met metalen rail and zonder zijrails
700-0880	Screws for Corner Bracket	Gebruik alleen de speciale schroeven voor de plastic hoeken
800-0004	Baby Tray BB100/BB300	Ook voor BB101/301/102
800-0041	Baby Tray BB400/BB400F	Ook voor BB401/401F/402
800-0002	Storage Box	Voor alle bed modellen
800-0013	Storage Box holder	Inclusief een set bolt pin and schroeven
800-0001	Storage Box lid	Voor alle bedjes
800-0003	Wheel top Cover	Voor alle bedjes
800-0501	Foot Pedal	Voor vervanging. Met kabel en label. Bracket niet meegeleverd.
800-0029	Bolt pin for pillar accessories.	Dia 7 mm, L 30 mm Schroef M5. Incl de schroef
700-0874	Wheel incl. bolt and bracket, with brake.	Standard op alle bedjes
700-0884	Double wheel 95mm, lockable	Optioneel
800-0048	Electrical pillar 230V	Alleen voor BB100 to 401F bedjes
800-0526	Electrical pillar 115 V	Alleen voor B100 to 401F bedjes
800-0506	Gas spring	Voor bedjes met standaard +17° tilt
BB172	Hydraulic tilt kit	Inclusief release hydraulic mechanisme, drukknop, haak/klem and dome nuts. Voor up-grading bedjes met mechanische tilt.
800-0519	Hydraulic gas spring control unit	Vervanging voor foutive hydraulic gas spring release

800-0528	Release button (black)	Pak van 5st. Moet worden vastgezet met Lock-Tite, lijm
800-0520	Locking handle	Te gebruiken met 800-0527
Art.no	Product	Additional Information
BB155	Foam Mattress	Voor BB100-301. Sealed, gemakkelijk schoon te maken
BB450	Foam Mattress	Voor BB400-401F. Sealed, gemakkelijk schoon te maken
BB161	Tent BabyBed	Voor BB100-301. Pink/Beige.
BB160	Tent BabyBed	Voor BB100-301. Geel/Terracotta.
BB162	Tent BabyBed	Voor BB100-301. Geel/blauw.
BB460	Tent BabyBed twin	Voor B400-401F. Geel/Terracotta.
BB170	Storage Box complete	Opslag box met deksel. Inclusief benodigde haken and schroeven .
BB180	Metal Shelf, low complete	Metalen plank met deksel. inclusief noodzakelijke haken en schroeven. 33x33x3cm
BB190	Metal Shelf, high complete	Metalen plank met deksel. inclusief noodzakelijke haken en schroeven. 33x33x5cm
800-0518	Drip pole	lengte 650mm, diameter 25mm. incl. locking handle. Voor Kanmed Babywarmer ophang of ander equipment
800-0502	Power cable for BabyWarmer	Speciale stroomkabel (1m) voor stroom voorziening van de Kanmed BabyWarmer, alle modellen. Maakt gebruik van de stroom uitgang van de paal onder het bedje.
BB171	Bottle Holder	Stainless steel haak voor bevestiging van de handdesinfectie flessen. Max diameter 70-80 mm.
BB173	Trendeleburg kit ($\pm 17^\circ$ tilt)	Bestaat uit speciale gas veer and top plaat.
BB175	Fot pedal kit Left/right	Bestaat uit Haak kabel en voet pedaal
BB176	Fot pedal front mount	Bestaat uit front haak, extra kabel en voet pedaal

OPMERKING: Veel andere accessoires en onderdelen zijn beschikbaar. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier of raadpleeg de website van Kanmed www.kanmed.se. Neem contact op met uw leverancier voor de prijslijst.

11 Garantieverklaring

Kanmed garandeert de aankoper dat het Kanmed BabyBed vrij is van defecten in het materiaal en fabricage in de eerste **5 jaar** vanaf leveringsdatum. Deze garantie heeft geen betrekking op plastic onderdelen, matrassen, kabels en hemeltjes.

De enige verplichting van Kanmed ten aanzien van eventuele dergelijke gebreken is beperkt tot reparatie bij nieuwe of opnieuw gefabriceerde onderdelen of, naar oordeel van Kanmed, vervanging van de apparatuur of vergoeding van de aankoopprijs.

Deze garantie is niet van toepassing indien het product gewijzigd, aangepast of gerepareerd is anders dan door Kanmed of door Kanmed gemachtigde organisaties, of anders dan overeenkomstig de door Kanmed geleverde schriftelijke instructies. Noch is de garantie geldig indien de apparatuur onderhevig is geweest aan onjuist gebruik, verwaarlozing of een ongeval.

Deze garanties worden gedaan onder voorwaarde dat Kanmed of een bevoegde leverancier binnen de garantieperiode onverwijld op de hoogte wordt gebracht van gebreken.

Kanmed heeft het exclusieve recht om te bepalen of er sprake is van een gebrek.

Kanmed is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere schade of gevolgschade ten gevolge van schending van de garantie, contractbreuk, verwaarlozing of enig ander recht.

12 EMC-richtlijnen

Het BabyBed voldoet aan de geldende vereisten van norm IEC 60601-1-2:2007 - Elektromagnetische compatibiliteit (EMC).

Het BabyBed is bestemd voor gebruik in een ziekenhuisomgeving, waarbij het op voldoende afstand van hoogfrequente chirurgische apparatuur of MR-camera's dient te worden geplaatst.

WAARSCHUWING: het gebruik van toehoren en kabels die niet door de fabrikant voor deze apparatuur worden aangegeven of geleverd, kan tot een verhoogde elektromagnetische emissie of een verlaagde elektromagnetische immuniteit, en daarmee tot een onjuiste werking van de apparatuur, leiden.

WAARSCHUWING: draagbare RF-communicatieapparatuur (bijv. mobiele telefoons, radiografische zenders, antennekabels en externe antennes) dient op minimaal 30 cm (12 inch) afstand van enig onderdeel van het BabyBed te worden gebruikt. Dit geldt tevens voor kabels die door de fabrikant voor deze apparatuur worden aangegeven. Een kortere afstand kan verminderde prestaties van deze apparatuur tot gevolg hebben.

OPMERKING: de emissiekenmerken van het BabyBed maken het geschikt voor gebruik in industriële gebieden en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Indien de apparatuur binnen instellingen met een woonfunctie wordt gebruikt (waarvoor normaliter CISPR 11 klasse B is vereist), dan levert deze apparatuur mogelijk onvoldoende bescherming tegen radiofrequente communicatiediensten. In dat geval dient de gebruiker maatregelen te nemen, zoals het verplaatsen of anders oriënteren van de apparatuur.

Voor meer informatie over elektromagnetische compatibiliteit met de gespecificeerde emissie- en immuniteitsnormen, testniveaus, etc. kunt u contact opnemen met KANMED.

13 Verwijdering



Als het Kanmed BabyBed het einde van zijn levensduur heeft bereikt, dient het (indien van toepassing) te worden gerecycleerd volgens EU-richtlijn 2012/19/EU (AEEA).

KANMED^o BABYBED



KANMED^o
a MedCare Visions[®] company

Hammarbacken 6A
SE-191 49 Sollentuna – Stockholm
Zweden

Telefoon +46 8 56 48 06 30

E-mail: info@kanmed.se
Homepage: www.kanmed.se

Gedistribueerd door: