


KANMED^o BABYBED

NAUDOTOJO VADOVAS

Art nr: BB100-401F-084 LT ver 5 Numatomi pakeitimai 2020-03-25

NAUDOTOJO VADOVAS

KANMED[®] BABYBED

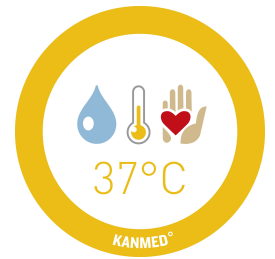

Art nr: BB100-401F-084 LT
ver 5
Numatomi pakeitimai
2020-03-25

Dėmesio

Prašome atidžiai perskaitykite
šį vadovą.

Pagaminta:

Kanmed AB
www.kanmed.se

Platintojas:

Lietuvos ir Šveicarijos UAB
„Hospitex Diagnostics
Kaunas“



Šis naudotojo vadovas galioja visoms Kanmed BabyBeds lovytėms, kurios pristatomos nuo 2017 m. sausio mėnesio.

TURINYS

TURINYS	2
1. Bendras aprašymas / Numatomas naudojimas	3
2. Įspėjimai	3
3 Simbolių aprašymas.....	4
4 Bendros naudojimo instrukcijos	5
5 Valymas	9
6 Reguliarūs saugos patikrinimai prieš naudojimą.....	10
7 Gedimų šalinimas	10
8 Techniniai duomenys.....	11
9 Techninis skyrius – Aptarnavimas ir priežiūra	12
10 Atsarginės dalys/ priedai.....	14
11 Garantija	15
12 EMC	15
13. Šalinimas/ perdirbimas	15

BB101 Standartinė be bėgelių BB100 Standartinė su bėgeliais BB400 Dvynių versija su bėgeliais



1. Bendras aprašymas / Numatomas naudojimas

Numatomas naudojimas

Kanmed kūdikio lovytės paskirtis yra užtikrinti idealią ergonominę ir saugią aplinką ligoninėje neišnešiotiems kūdikiams ir naujagimiams. Taip pat tinka naudoti su Kanmed BabyWarmer sistemomis BW3 ar BW-50.

KanMed kūdikio lovytė yra skirta naudoti ligoninėje tik apmokytam personalui arba kūdikio slaugei pagal šiame vadove išdėstytas instrukcijas ir pagal ligoninės klinikinės taisykles. Tik instrukuoti asmenys gali naudotis šiuo prietaisu.


2. Įspėjimai

- Nenaudokite Kanmed kūdikio lovytės kūdikiams/ vaikams, kurie gali taip judėti, kad iškristų iš lovytės.
- Nejudinkite lovytės, kai ji yra aukštoje padėtyje. Visada naudokite žemą padėtį.
- Nenaudokite šoninių sienelių lovytei perkelti – priklausomai nuo modelio visada naudokite šoninius bėgelius arba priekinę rankeną .
- Nepalikite kūdikio be priežiūros, esant nuleistoms šoninėms sienelėms.
- Laikykitės svorio apribojimų.
- Nedėkite elektrinės įrangos ant lentynos po kūdikiu.
- Patikrinkite ar lovytė nekliba, ar visi ratukai ir varžtai yra pritvirtinti.
- Įsitikinkite ar arti nėra žmonių ar daiktų, kai keičiate lovytės aukštį.
- Nuimkite širmos stulpą, jei lovytę naudojate be širmos.
- Širmos stulpas yra skirtas naudoti tik su širma.
- Jei vaikai, giminaičiai ar pacientai, ar pacientai, turintys specialiųjų poreikių, gali nuspausti kojinių pedalą, tuomet atjunkite srovę. Įsitikinkite ar Kanmed BabyWarmer vis dar yra įjungtas.
- Laikykitės saugaus atstumo nuo kitų daiktų, kurie gali judėti ar nukristi.
- Maksimalus čiužinio storis yra 40 mm.
- Tik apmokyti asmenys gali naudotis Kanmed kūdikio lovyte.

3 Simbolių aprašymas

	Prieš darbą perskaitykite naudotojo vadovą.		
Galimi modeliai:			
BB100	Standartinė kūdikio lovytė	BB101	Ta pati, bet be bėgelių
BB400	Kūdikio lovytė dvyniams	BB401	Ta pati, bet be bėgelių
BB300	Kūdikio lovytė su fiksuotu aukščiu	BB301	Ta pati, bet be bėgelių
BB400F	Kūdikio lovytė su fiksuotu aukščiu dvyniams	BB401F	Ta pati, bet be bėgelių

Maksimali saugi apkrova:

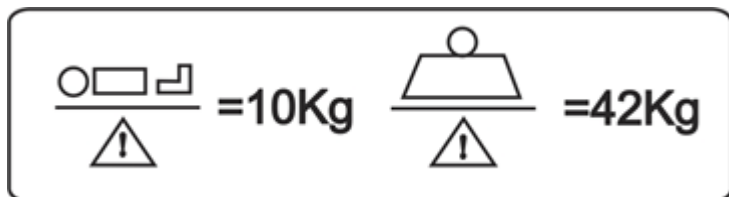

Lovytės lovelis, visiems modeliams: kūdikis (-iai) svoris 10 kg bendras + vandens čiužinys (-iai) gelio čiužiniai ar kiti čiužiniai, bendras 10 kg

Saugojimo dėžės dangtis po lovos platforma: 2 kg

Saugojimo dėžė po lovos platforma: 2 kg

Šoniniai bėgeliai aplink lovą: maks 3,5 kg kiekvienam bėgeliui. Maks bendras 10 kg kartu visiems bėgeliams. **Lentyna:** 5 kg. **Galinio tvirtinimo rinkinio** poliai: 3 kg kiekvienas

Priekinė rankena: 5 kg (modeliai be šoninių bėgelių)

	Simbolis ant kojinio pedalo lovos platformos pakėlimui ir nuleidimui (neskirta BB300/301 ir BB400F/401F)		
	Simbolis pakėlimo funkcijai, randasi ant lovytės lovelio etiketės		
	Atitinka MDD 93/42 EEC		
	Įžeminimas		
	Apsaugos laipsnis (prieš vandens patekimą ir daiktus)		
	Apsaugos laipsnis Tipas B (kūnas) (neskirta BB300,301 / BB400F,401F)		
	Kai kūdikio lovytė atitarnauja, ji turėtų būti grąžinama platintojui perdirbimui pagal EU 2002/96/EC (WEEE) direktyvą, jei taikoma.		
	Pagaminimo metai.		Maks minučių be sustojimo
	Bendras lovytės svoris, kai pakauta, su maks leidžiamais svoriais		
	Pavojus susižeisti ranką		

4 Bendros naudojimo instrukcijos

4.1 Pirmas valymas

Kanmed kūdikio lovytė ir priedai yra gamykliškai švarūs, bet turi būti nuvalyti pagal Jūsų ligoninės instrukcijas.

Prašome perskaityti skyrių **Valymas**.

4.2 Patikrinkite stabilumą

Įsitikinkite ar visi varžtai yra tinkamai pritvirtinti ir ar lovytė yra stabili.

4.3 Kaip nuleisti šonines sienes

Šoninės sienelės ir priekinė sienelė yra nuleidžiamos šiuo būdu.

Abiem rankomis laikykite ir nuimkite viršutinius kraštus.

Švelniai patraukite link savęs (apie 2 cm/ vienas colis) ir paspauskite žemyn.


Abiem rankomis pakelkite šonines sienes vėl ir jos įsistums į vietą.

Įsitikinkite ar visos šoninės sienelės tinkamai juda ir yra geros būklės.

PASTABA: Grioveliai šoninėje sienelėje yra skirti vamzdelių fiksavimui.

PASTABA: Patikrinkite ar niekas neįstrigo, kai nuleidžiate ar pakeliate šonines sienes.

PASTABA: Kaip nuimti šonines sienes – skaitykite skyriuje **Valymas**.

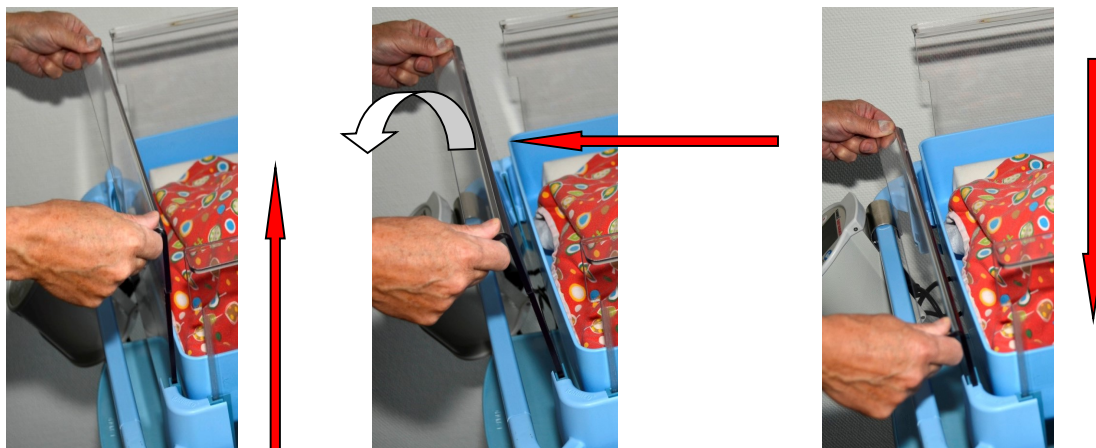

4.4 Kaip perkelti lovytę

Visada naudokite šoninius bėgelius ar priekinę rankeną lovytės perkėlimui.

Įspėjimas: Transportuodami ar perkeldami lovytę, ypač jei joje yra kūdikis, nustatykite žemiausią aukštį.

PASTABA:

- Nenaudokite šoninių sienelių lovytės perkėlimui.
- Neužmirškite atjungti kabelius prieš perkėlimą.
- Naudokite ratukų stabdžius, kai lovytė stovi vietoje.

4.5 Kūdikio lovytės prijungimas prie maitinimo

(neskirta BB300/301 ir BB400F/401F)

Kūdikio lovytė turi būti prijungta prie įžeminimo.

Suvyniokite kabelį taip, kad niekas už jo neužkliūtų.

PASTABA: Norint išjungti, reikia atjungti kabelį nuo stovo ar sieninio lizdo.

Lovytę pastatykite taip, kad būtų galima lengvai atjungti kabelį.

ĮSPĖJIMAS: Siekiant išvengti elektros šoko rizikos, ši įranga turi būti prijungta prie maitinimo tik su įžeminimu.



iš

4.6 Kaip reguliuoti aukštį

(neskirta BB300/301 ir BB400F/401F)

Aukštis reguliuojamas spaudžiant kojinių pedalą.

Ijunkite maitinimą, lovytę pakelkite ir nuleiskite, siekdami įsitikinti ar ji juda sklandžiai be neįprasto garso.

Gali būti girdimas variklis, kuris įspėja, kad lovytės platforma juda.

Pedalai gali būti tvirtinami prie kairiojo arba dešiniojo šono arba abiejose pusėse. Taip pat yra galimas priekinis pedalas.



ĮSPĖJIMAS:

Keičiant aukštį, įsitikinkite ar joks asmuo, kabelis ar kitas daiktas netrukdo judėti. *Dukart pagalvokite ir vieną kartą paspauskite!*

Jei vaikai, artimieji ar pacientai gali nuspausti kojinių pedalą, tada atjunkite srovę. Įsitikinkite ar Kanmed BabyWarmer vis dar yra įjungtas.

Neužblokuokite lovytės judėjimo, kai yra įjungtas elektrinis aukščio reguliavimas.

4.7 Pakreipimas

Keliant lovytę, abiem rankom tvirtai laikykite už priekinio bėgelio ar rankenos ir spauskite atlaisvinimo mygtuką, esantį po dešiniuoju kampu..


Tuo pat metu spauskite lovytę žemyn arba aukštyn iki norimos padėties. Atleiskite rankeną.

Maksimalų pakreipimo kampą gali apriboti inžinierius

Yra galimas rinkinys pakėlimo funkcijos atnaujinimui + ir - 17 laipsnių, Trendelenburg padėtis. Artikulo nr BB173



Pakėlimo atlaisvinimo mygtukas modeliuose be šoninių bėgelių

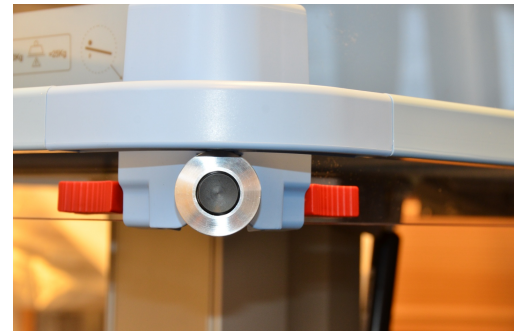

Pakėlimo atlaisvinimo mygtukas modeliuose su šoniniais bėgeliais

4.8 Širmos stulpas, širma ir čiužinys


Širmos stulpą tvirtinkite užpakalinėje konsolėje. Pasukite ją 90 laipsnių kampu nuo lovos ir paspauskite žemyn taip, kad varžtai įeitų į griovelius.

Širma turi griovelį viduje.

Įkiškite širmos stulpą į griovelį jį išspausdami ir uždėkite širmos šonus ant šoninių sienelių.

Į lovytę įdėkite čiužinį.

Kitų čiužinio tipų ir namų gamybos širmų naudojimas gali nutraukti Kanmed teisinę atsakomybę.

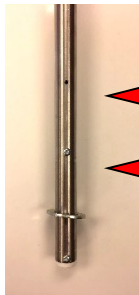


← Stop fiksavimo varžto padėtis B100/101/300/301

← Stop fiksavimo varžto padėtis Dvynių lovytės versijos

4.9 Lopšys

Lopšys gali būti tvirtinamas prie lovos arba gali būti laisvas, priklausomai nuo užsakymo.

Jeigu jūs norite lopšį pastoviai pritvirtinti prie lovos, Kanmed gali pasiūlyti specialią juostelę šiam tikslui.

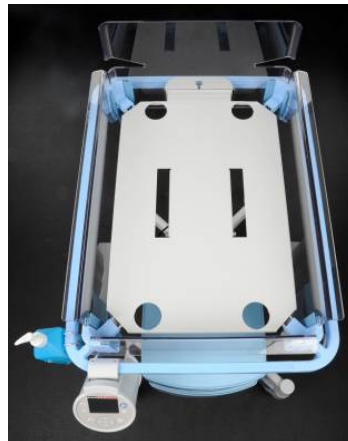

4.10 Saugojimo dėžės

Saugojimo dėžės su ar be dangčio gali būti tvirtinamos po lova.

Jos gali aplink suktis.

Laikykites nurodytų apkrovimo ribų



4.11 Kanmed BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer valdymo įrenginys yra įprastai dedamas ant lentynos po lovyte, naudojant reguliuojamą laikiklį.

Yra ir kitų būdų kaip Kanmed BabyWarmer pritvirtinti prie lovytės.

Prašome žiūrėti www.kanmed.se, BabyBed, Downloads, dokumentas vadinasi "possible ways to mount...".

Šildymo įrenginio kabelis yra perveriamas per vieną iš lovytės angų ir prijungiamas prie valdymo įrenginio.



4.12 BabyWarmer maitinimo laidas

Kanmed BabyWarmer yra prijungtas prie maitinimo kabeliu arba specialiu trumpu kabeliu

(užsakymo numeris 800-0057) prijungtu prie viršutinio stovo – žr. paveikslėlį – žr. Kanmed BabyWarmer naudotojo vadovą platesnei informacijai apie Kanmed BabyWarmer naudojimą



4.13 Galinio tvirtinimo rinkinys

Visose naujesnėse lovytėse yra įrengtas galinis laikiklis.

Stulpeliai su varžtais yra priedai ir yra standartinio 25 mm diametro nerūdijančio plieno vamzdeliai. Užsakymo numeriai yra 10 skyriuje

Maks svoris kiekvienam laikikliui: 3 kg



4.14 Papildoma lentyna

Lentyna gali būti užsakoma vietoj saugojimo dėžių. Artikulo nr: 800-0530

4.15 Kiti priedai

Kanmed priedai yra tvirtinami ir naudojami pagal instrukcijas, kurios yra kartu su dalimis.

Laikykitės svorio apribojimų nurodytų 3 skyriuje.

Kitų priedų naudojimas reikalauja atidaus įvertinimo dėl svorio apribojimų, tinkamumo, tvirtinimo prie lovytės ir pan.

Kanmed yra atsakinga tik už savo pristatomus priedus.

Dėl Kanmed priedų žiūrėkite www.kanmed.se arba susisiekite su savo platintoju.

5 Valymas

Bendra informacija

Lovytė ir priedai turi būti atidžiai valomi po kiekvieno paciento.

Laikykitės ligininės higienisto nustatytų procedūrų.

Prieš ir po valymo apžiūrėkite visas dalis.

Žemiau yra Kanmed rekomenduojamų valymo ir dezinfekavimo priemonių sąrašas. Kitų priemonių naudojimas gali pažeisti kai kurias ar visas dalis. Jei abejojate, susisiekite su Kanmed dėl konkretaus produkto specifikacijos.

Šoninės sienelės yra pagamintos iš PET (ekologiškai švarus) ir atlaikys visų rūšių valymo bei dezinfekavimo tirpalus.

Nenaudokite balinimo priemonių ir tirpiklių.

Valymas: Naudokite muiluotą vandenį.

Dezinfekavimas: Kanmed kūdikio lovytė atlaiko dažniausiai ligininėse naudojamas paviršių dezinfekavimo priemones. Virkon®, Diversey Limpiador Clorado, Clinell wipes, Chlor Clean wipes, Meliseptol® rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® ir pan. Jei abejojate, pabandykite ant mažo ploto paviršiaus arba susisiekite su savo platintoju ar Kanmed.

SPECIFINĖ INFORMACIJA

5.1 Lovytės valymas

Naudokite gerai išgręžtus audinio gabalėlius.

PASTABA: Kanmed kūdikio lovytės jokiais būdais negalima apipilti jokių skysčių.

Nevalykite jos dezinfekavimo kameroje.

5.2 Lopšys

Lopšys yra nepritvirtintas. Todėl jis gali būti nuimamas, kad būtų lengviau valyti.

5.3 Šoninių sienelių valymas



Šoninių sienelių nuėmimas.

Paspauskite raudonus stabdiklius į vidų, kad užrakinti šoninę sienelę ir pakelkite.

Paspauskite raudoną stabdiklį į išorę, kad užrakinti šoninę sienelę

Įspauskite sklendes, žr. rodyklę, ir pakelkite šoninę sienelę keliais centimetrais. Pakartokite tai su kita puse ir pakelkite šoninę sienelę. Šoninių sienelių neplaukite indaplovėje.

Šoninių sienelių netrinkite su braižančiomis medžiagomis.

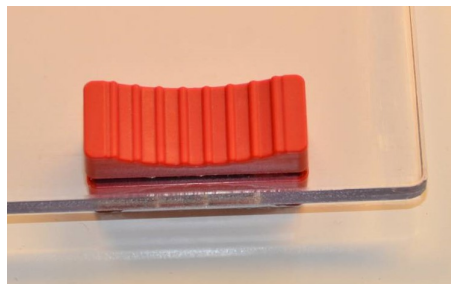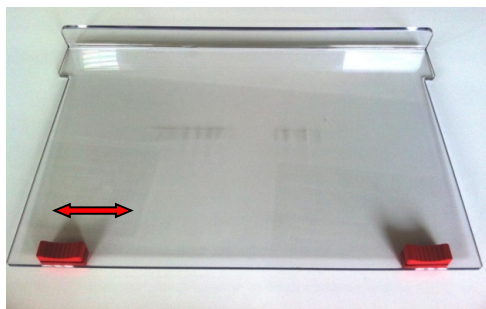

5.4 Saugojimo dėžės ir dangteliai

Saugojimo dėžės ir dangteliai yra valomi ir dezinfekuojami taip pat, kaip iš lovytės.

5.6 Šiužinys

Naudokite paviršiaus valymui ir dezinfekavimui medžiagas rekomenduojamas Kanmed.

5.7 Palapinė

Žiūrėti skalbimo instrukciją etiketėje.

Palapinę galima skalbti 90 ° C temperatūroje, tačiau gali sutrumpėti dėvėjimo laikas.

6 Reguliarūs saugos patikrinimai prieš naudojimą

Bendra informacija

Įsitikinkite ar visos dalys yra geros būklės, ar nėra spalvos pakitimų, įbrėžimų. Pakeiskite tas dalis, kurios nėra geros būklės. Yra būtina kasmetinė priežiūra. Žr. techninį skyrį.

Rekomenduojami veiksmai prieš naudojimą	Vykdytojas	Grafikas	Papildoma informacija
Šoninių sienelių funkcija	Naudotojas	Prieš kiekvieną naudojimą	Įsitikinkite ar jos lengvai juda aukštyn bei žemyn ir ar jos užsitvirtina viršutinėje padėtyje.
Pakreipimas	Naudotojas	Prieš kiekvieną naudojimą	Įsitikinkite ar juda laisvai ir patikimai užsifiksuoja bet kuriuo kampu.
Kabeliai ir jungtys	Naudotojas	Kasdien	Įsitikinkite ar jie yra tvarkingi.
Stabilumas ir vientisumas	Naudotojas	Kasdien	Įsitikinkite ar kūdikio lovytė yra geros būklės ir stabili ir ar visos funkcijos veikia tinkamai.
Kanmed BabyWarmer	Naudotojas		Žr. Kanmed BabyWarmer naudotojo vadovą.
Ratukai / stabdžiai	Naudotojas	Prieš kiekvieną naudojimą	

7 Gedimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Veiksmai
Pakėlimo kolonėlės nejuda kaip norite. (neskirta BB300 ir BB400F)	Nėra maitinimo šaltinio.	Patikrinkite kabelius. Patikrinkite saugiklius.
	Kažkas blokuoja judesius.	Patikrinkite ar niekas neblokuoja.
	Elektrinė jungtis neveikia arba netinkamai prijungta.	Techninė tarnyba
	Kojinis pedalas sugedęs arba kabelis neprijungtas.	Techninė tarnyba
Jūs negalite pakreipti kūdikio lovytės. Užstringa daugelyje padėčių. Neišlaiko padėties.	Neveikia nustatymas arba reikia sureguliuoti.	Techninė tarnyba
Kūdikio lovytė nestabili.	Kažkas blokuoja.	Patikrinkite ar niekas neblokuoja.
Aukščio reguliavimas skleidžia neįprastus garsus.	Atsilaisvinę varžtai ar ratukai.	Techninė tarnyba
		Techninė tarnyba

8 Techniniai duomenys

	BB100 / 101 Standartinė BB300 / 301 Fiksuotas aukštis		BB400 / 401 Dvynių versija BB400F / 401F Fiksuotas aukštis	
Išorės matmenys	Su šoniniais bėgeliais, I 85cm, P 63cm	Be šoninių bėgelių I 83cm, P 53cm	Su šoniniais bėgeliais I 95cm, P 80cm	Be šoninių bėgelių I 93 cm, P 70 cm
Lopšys Vidiniai matmenys	I 690mm P 465mm A 90 mm Pagamintas iš PP		I 765 mm P 640 mm A 90 mm Pagamintas iš PP	
Aukštis nuo grindų lopšio apačios	Min 78 cm Maks 108 cm. Fiksuotas aukštis yra 80 cm. Užsakant 9,5 cm dvigubus ratukus sumažinamos visos lovytės apie 4 cm			
Svoris	Apie 46 kg Fiksuoto aukščio apie 36 kg		Apie 52 kg Fiksuoto aukščio apie 42 kg	
Ratukų bazė	64 cm x 87 cm			
Ratukai	Diametras 125mm su stabdžiais ar 9,5 cm dvigubi ratukai su stabdžiais			
Pakėlimas	Apie 17 laipsnių		Apie 17 laipsnių	
Čiužinys	Minkštas putų		Minkštas putų	
Širma	Plaunama 60°C (90°C)		Plaunama 60°C (90°C)	
Saugojimo dėžė	I 320 mm P 330 mm A 120 mm, Dangtis 320 x 330 mm			
Spalvos	Unisex šviesiai mėlyna visoms plastikinėms detalėms. Ratukai ir metalinės dalys šviesiai pilkos			
Įtampa BB100/400	230V 50Hz / 60Hz ar 115V 60Hz			
Galia BB100/400	???			
Saugikliai BB100/400	2xT6, 3A 230V, Keisti tik to paties tipo ir našumo			
Elektros lizdas stovas BB100 ir BB400: Maks 300W				
Apsauga BB100/400: I klasė				

Pakeitimai ĮSPĖJIMAS	Bet kokie Kanmed kūdikio lovytės pakeitimai įskaitant namų darbo priedus gali visiškai nutraukti Kanmed atsakomybę ir yra negalimi be rašytinio Kanmed pritarimo.
Sistemų kūrimas	Bet kuris asmuo, jungiantis Kanmed kūdikio lovytę prie kitos sistemos maitinimo lizdo, sukuria „sistemą“ pagal IEC 60601-1 skyrių 16 ir turi būti kvalifikuotai įvertintos bet kokios pasekmės, galinčios sužaloti personalą, pacientą ir įrangą.
Prognozuojamas tarnavimo laikas	Kanmed suteikia saugų 10 metų tarnavimo laikotarpį nuo pirmos naudojimo dienos. Su sąlyga, kad Kanmed kūdikio lovytė buvo prižiūrima pagal naudotojo ir serviso vadovus ir kad prietaisas nebuvo modifikuotas ar pakeistas.

Produktai yra pažymėti CE ženklu.

Atitinka UL 60601-1

Aplinkos duomenys

Naudojimo: +10 iki +40°C, <85% RH

Transportavimo: -20 iki +60°C, nekondensuota.

Saugojimo: +10 iki +40°C, nekondensuota.

Atmosferos slėgis: 70 iki 106 kPa

9 Techninis skyrius – Aptarnavimas ir priežiūra

PASTABA: Visos atsarginės dalys pakeitimui ar remontui turi būti naudojamos iš Kanmed ar jos įgalioto atstovo. „Kanmed neleidžiamų dalių“ naudojimas automatiškai perleis visą saugumo atsakomybę ligoninei. Tik kvalifikuotas personalas gali atlikti remonto darbus. Nebandykite atlikti priežiūros darbų, kūdikiui esant lovytėje.

9.1 Kasmetiniai patikrinimai / priežiūra

Tikrinkite bent kartą metuose:

- Kabeliai ir jungtys yra be defektų.
- Šoninės sienelės nesubraižytos ar nepažeistos.
- Patikrinkite kampus – ar nėra įtrūkimų plastike, neatsilaisvinę varžtai? Dėmesio, specialūs plastiko varžtai.
- Patikrinkite šoninės sienelės laikiklius, jei reikia.
- Patikrinkite ar šoninės sienelės nusileidžia ir pakyla be problemų.
- Patikrinkite ar kojinio pedalo aukščio kontrolė reaguoja be uždelimo, ar pakėlimo ir nuleidimo funkcijos teisingai veikia ir ar nesklinda neįprastas garsas, kai veikia ir ar nepažeistas kabelis.
- Patikrinkite ar pakėlimo funkcija veikia tinkamai. Ji neturi skleisti jokio garso.
- Patikrinkite ar laidas į stūmuoklį ir pakėlimo rankena nepažeisti.
- Patikrinkite ar ratukai pritvirtinti prie stovo ir nepažeisti, ar jei sukasi be triukšmo ir ar ratukų užrakinimo funkcija veikia be priekaištų.
- Patikrinkite ar visi varžtai yra tinkamai priveržti, ypač varžtai jungiantys aukščio reguliavimą stovė su ratukų baze, varžtai stovo viršuje, varžtai laikantys lovytės platformą ir stūmuoklį.
- Patikrinkite ar kojinio pedalo etiketė nenusidėvėjusi.
- Patikrinkite ar lopšio etiketė nenusidėvėjusi.

Aptarnavimas

PASTABA: Visada ištraukite maitinimo laidą prieš atlikdami kūdikio lovytės remonto darbus.

Visada atlikite pilną funkcinį testą po remonto darbų.

9.2 Pakėlimo funkcijos reguliavimas / Stūmuoklis

Šoninėje dešinėje pusėje judinant paleidimo rankeną, nuspauskite mygtuką orinio stūmuoklio viršuje. Vėlos įtempimas yra per laisvas arba per daug įtemptas, jei kūdikio lovytės negalima pakelti arba pakelti be neliečiant paleidimo rankenos. Sureguliuokite stūmuoklio paleidimą, pasukdami reguliavimo varžtą (po paleidimo rankeną). Nesuaktyvintus stūmuoklio nebus įmanoma pajudinti.

Jei vis dar neįmanoma pakelti arba pakelti neliečiant paleidimo rankenos, tada turi būti sureguliuojamas stūmuoklio mygtukas. Jei įmanoma, prailginkite stūmuoklį, nustatydami kūdikio lovytę iki maksimalaus pakėlimo. Atleiskite fiksavimo veržlę stūmuoklyje. Atleiskite stūmuoklį nuo stovo. Paspauskite paleidimo rankeną. Jei stūmuoklis nejuda, tuomet atleiskite rankeną ir sukite stūmuoklį pagal laikrodžio rodyklę tol, kol pradės judėti. Greitai atlikite pilną pasukimą prieš laikrodžio rodyklę, kad sustabdyti judėjimą. Dabar vėl išdėstymas turėtų normaliai atleisti stūmuoklį. Jei juda neliečiant paleidimo rankenos, sukite prieš laikrodžio rodyklę tol, kol pats sustos.



9.2.1. Pakėlimo ribos reguliavimas

Pakėlimo riba gali būti apribojama, judinant žemyn stūmuoklio laikiklį stovė. Įsitikinkite ar tinkamai pritvirtinote. Rinkinys skirtas keisti pakėlimo diapazoną, kad būtų galima pakelti lovytę ± 17 laipsnių

9.3 Šoninio bėgelio ar kampo reguliavimas

Žiūrėkite atsarginių dalių sąrašą dėl dalies numerių. Šoninio bėgelio kampai yra priveržti nuo apačios dviem (2) specialiais plastikiniais varžtais ties kiekvienu kampu. Angos lovoje yra ovalios, leidžiančios tvirtai sureguliuoti šoninius bėgelius. Patartina išimti varžtus ties 2 kampais pritvirtinti naujus kampus ar šoninius bėgelius.

Nenaudokite jokių kitų varžtų išskyrus Kanmed dalies nr 700-0880, kadangi jie nepakankamai tvirti. Varžtas gali būti įsukamas ir išsukamas apie 6 kartus į tą pačią plastikinę angą.

9.4 Kaip pridėti, nuimti ar reguliuoti saugojimo dėžes

Atsukite varžtus saugojimo dėžės laikiklyje. (Jei reikia, nuimkite juodą dekoratyvinę plastikinę juostą). Perkelkite į naują padėtį ir tvirtai prisukite varžtus.

Kaip nuimti ar pridėti papildomą dėžės laikiklį: pakelkite stovą daugiau nei 5 cm. Paspauskite juodą plastikinį rėmelį, einantį aplink stovo dugną. Dabar jūs galite atsukti ar prisukti varžtus.

Pridedant daugiau saugojimo dėžių, įsitikinkite ar priekinė šoninė sienelė gali būti pakankamai nuleidžiama.

Nukirpkite dekoratyvines juodas plastikines juostas, kad tiktų. Naujas juostas galite užsisakyti iš Kanmed.

9.5 Kaip keisti kojinių pedalą/ elektros jungtis

Atsargiai paguldyskite lovytę ant šono. Atjunkite pedalą nuo stovo, atsukite kojinių pedalą ir pakeiskite jį. Pakelkite kūdikio lovytę ir patikrinkite funkcijas ir ar aukštyn/ žemyn rodyklės teisingai rodo.

9.5 1 Pridėti papildomą pedalą ar priekinį pedalą

Susisiekite su Kanmed dėl reikalingų instrukcijų ir dalių

9.6 Kaip keisti stovą

Elektriniu būdu pakelkite stovą apie 5 cm, jei galima.

Atjunkite.

Ištuštinkite lovytę ir nuimkite šonines sieneles bei lopšį.

Nuimkite saugojimo dėžes. Paspauskite plastikinį rėmelį stovo apačioje. Nuplėškite plastikines juosteles taip, kad galėtumėte nuimti metalinius varžtus, laikančius priedus prie stovo. Jei stovas negali judėti, tada užsisakykite naujus metalinius varžtus.

Nuimkite stūmuoklį nuo stovo, o taip pat jo laikiklius.

Atlaisvinkite varžtus, laikančius lovytę. Šie du varžtai yra tvirtai prisukti ir norint juos atsukti reikia kokybiškų įrankių ir jėgos. Apžiūrėkite kiekvieną kabelį Neužmirškite įžeminimo kabelio.

Atlaisvinkite varžtus stovo viršuje, kad nuimti lovytės laikiklius. Apžiūrėkite įžeminimo kabelį.

Atjunkite aukščio reguliavimą.

Stovą/ lovytę apverskite aukštyn.

Atsukite įžeminimo varžtus jungtis.

Įžeminimo kabelį padėkite po lovyte.

Atlaisvinkite varžtus po ratukų baze ir nuimkite kojinių pedalą. Šie du varžtai yra tvirtai prisukti ir norint juos atsukti reikia kokybiškų įrankių ir jėgos. Apžiūrėkite kiekvieną kabelį

Atsukite stovą. Apžiūrėkite įžeminimo kabelį.

Surinkite – atlikite nurodymus atvirkštine tvarka.

Atlikite pilną funkcinį patikrinimą ir elektros saugumo testą, siekiant užtikrinti, kad kūdikio lovytė yra tinkamai įžeminta.

10 Atsarginės dalys/ priedai

PASTABA: Yra daug kitų priedų ir atsarginių dalių. Pasiteiraukite pas savo vietinį tiekėją arba Kanmed interneto svetainėje www.kanmed.se Dėl kainoraščio susisieki su savo tiekėju.

Art. No.	Product	Additional information
BB112	Under bed BabyWarmer holder	A kit includes complete instruction. Requires a 7mm metal drill on beds before 2018. Also specify if it is for single or twin beds. BW3 may require bracket holder BW3-0837.
800-0116	Side wall rear BB101/301	Height 25cm. Beds without side rails. Groves for tubing.
800-0117	Side wall rear BB401/401F	Height 29cm. Beds without side rails. Groves for tubing.
800-0118	Side wall rear BB100/BB300	Height 25cm. Groves for tubing.
800-0119	Side Wall rear BB400/400F	Height 29cm. Groves for tubing.
800-0010	Side wall rear BB100/BB300.	Height 29 cm, Grooves for tubing
800-0105	Side wall rear BB101/BB301	Height 25 cm. For beds without side rails only groces for tubing
800-0042	Side Wall rear BB400/400F	Height 29 cm. Grooves for tubing
800-0109	Side wall rear BB401/401F	Height 25 cm For beds without side rails. Groves for tubing.
800-0077	Side wall left/right BB100/BB300	Height 29 cm
800-0101	Side wall left/right BB101/BB301	Height 25 For beds without side rails only
800-0079	Side wall left/right BB400/BB400F	Height 29 cm
800-0107	Side wall left /right BB401/401F	Height 25 For beds without side rails only
800-0076	Side wall front BB100/BB300	Height 29 cm
800-0100	Side wall front BB101/BB301	Height 25 cm For beds without side rails only
800-0078	Side wall front BB400/BB400F	Height 29 cm
800-0108	Side wall front BB401/401F	Height 25 cm For beds without side rails only
800-0072	Side wall stop red	Set of 4 pcs
800-0023	Side Rail front/rear BB100/BB300	Length 40 cm
800-0022	Side Rail sides BB100/BB300	Length 62 cm
800-0044	Side Rail front/rear BB400/BB400F	Length 57,7 cm
800-0045	Side Rail sides BB400/BB400F	Length 72,3 cm
800-0110	Corner BB100-400	Incl. 2 screws and cover under handle. For beds with side rails.
800-0098	Corner Handle BB101-401	Incl. 2 screws. For beds without siderails
700-0880	Screws for Corner Bracket	Use only this special screw for plastic corners
800-0004	Baby Tray BB100/BB300	Also for BB101/301
800-0041	Baby Tray BB400/BB400F	Also for BB401/401F
800-0002	Storage Box	For all bed models
800-0013	Storage Box holder	Includes set of bolt pin and screws
800-0001	Storage Box lid	For all beds
800-0003	Wheel top Cover	For all beds
800-0501	Foot Pedal	For replacement. With cable and label. Do not include the bracket.
800-0029	Bolt pin for pillar accessories.	Dia 7 mm, L 30 mm Screw M5. Including the screw.
700-0874	Wheel incl bolt and bracket, with brake.	Standard on all beds
700-0884	Double wheel 95mm, lockable	Option. When ordering for new bed the price is 200,- each
800-0048	Electrical pillar 230V	For BB100 to 401F beds only
800-0526	Electrical pillar 115 V	For BB100 to 401F beds only
800-0506	Gas spring	For beds with standard +17° tilt
BB172	Hydraulic tilt kit	Includes release hydraulic mechanism, button, bracket and dome nuts. For upppgrading beds with mechanical tilt.
800-0519	Hydraulic gas spring control unit	Replacement for faulty hydraulic gas spring release
800-0528	Release button (black)	Pack of 5pcs . Must be secured with lock Tite glue
700-0879	O-ring for Storage Box	
800-0301	Fixed height pillar (530mm)	
800-0520	Locking handle	14 To be used with 800-0527

11 Garantija

Kanmed garantuoja pirkėjui, kad kūdikio lovytė yra be defektų ir dirbs be sutrikimų 5 metai nuo pristatymo datos. Garantija netaikoma plastikinėms dalims, kabeliams ir širmoms.

Vienintelis Kanmed išpareigojimas dėl tokių defektų apsiriboja remontu, pakeičiant naujomis arba perdirbtomis dalimis arba, Kanmed nuožiūra, įrangos pakeitimas ar sumokėtų pinigų gražinimas.

Ši garantija netaikoma, jei produktas buvo modifikuotas, reguliuotas ar remontuotas kitos firmos arba buvo modifikuotas, reguliuotas ir taisytas Kanmed įgalioto atstovo ne pagal rašytines instrukcijas, pateiktas Kanmed.

Taip pat garantija netaikoma, jei įranga buvo netinkamai naudojama.

Šios garantijos galioja su sąlyga, jei skubiai pranešama apie defektą Kanmed arba jo įgaliotam atstovui garantijos galiojimo metu.

Kanmed turi teisę nustatyti ar egzistuoja defektas.

Kanmed nebus atsakinga už specialius ar svarbius gedimus, kylančius dėl garantijos pažeidimo, sutarties pažeidimo, nerūpestingumo ar aplaidumo.

12 EMC

Kūdikio lovytė atitinka IEC 60601-1-2:2007 Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus.

Kūdikio lovytė turi būti naudojama ligoninėje, bet tik ne šalia HF chirurginės įrangos ar MR kamerų.

ĮSPĖJIMAS: Kitų nei nurodytų gamintojo priedų ir kabelių naudojimas gali sukelti padidėjusią elektromagnetinę emisiją ar sumažėjusį elektromagnetinį atsparumą bei sąlygoti netinkamą šios įrangos veikimą.

ĮSPĖJIMAS: Portatyvi RF komunikacijos įranga (pvz. mobilūs telefonai, radio siųstuvai, antenos kabeliai ir išorinės antenos) turėtų būti naudojama ne arčiau nei 30 cm (12 colių) nuo kūdikio lovytės, įskaitant lovytės kabelius. Priešingu atveju ši įranga gali blogai veikti.

PASTABA: Šios įrangos EMISIJOS charakteristikos leidžia šią įrangą naudoti pramoninėse zonose ir ligoninėse (CISPR 11 klasė A). Jei naudojama gyvenamojoje aplinkoje (kuriai paprastai reikalaujama CISPR 11 klasė B), ši įranga negali suteikti tinkamos apsaugos radio-dažnių komunikacijai. Naudotojas turi imtis mažinimo priemonių tokių, kaip įrangos perstatymas.

Dėl platesnės informacijos apie EMC atitikimą specifinės emisijos ir atsparumo standartui, testo lygius, pan., susisiekite su Kanmed.

13. Šalinimas/ perdirbimas



Kai Kanmed kūdikio lovytė atitarnauja, ji turėtų būti perdirbama pagal EB 2002/96/EB (WEEE) direktyvą, jei taikytina.



Gardsfogdevagen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stokholmas
Švedija

Tel. +46 8 56 48 06 30

El.paštas: info@kanmed.se

Interneto svetainė: www.kanmed.se

Platintojas:

Lietuvos ir Šveicarijos UAB "Hospitex Diagnostics Kaunas"
Antagynės g. 1
47164 Kaunas, Lietuva

Tel. +370 37 363056

Faks. +370 37 362231

El.paštas: info@hospitex.lt

Interneto svetainė: www.hospitex.lt



Kanmed AB

Gardsfogdevägen 18 B
16867 Bromma

E-Mail info@kanmed.se

Telefon +46 85 64 80 630