

KANMED^o BABYBED

Használati Utasítás

BB100-401F-093 ver 5 - 2020-03-25

Használati Utasítás

KANMED^o BABYBED



Art no: BB100-401F-093 ver 5
2020-03-25



Figyelmeztetés

Gondosan olvassa el a Használati Utasítást.
Nem megfelelő használat a páciens, vagy a felhasználó sérülését okozhatja.

Előállító:

Kanmed AB
www.kanmed.se

A Használati Utasítás minden, 2017 után készült Kanmed BabyBed-re érvényes.

Tartalomjegyzék

1 TERVEZETT HASZNÁLAT	3
2 FELSZÓLÍTÁSOK	3
3 A SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA	4
4 HASZNÁLATI UTASÍTÁS	5
5 TISZTÍTÁS	9
6 HASZNÁLAT ELŐTTI RENDSZERES BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS	10
7 HIBAKERESÉS	10
8 TECHNIKAI ADATOK	11
9 TECHNIKAI FEJEZET – SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS	12
10 PÓTKATRÉSZEK/TARTOZÉKOK	14
11 GARANCIA	15
12 EMC TANÚSÍTVÁNYOK	15
13 HULLADÉKKEZELÉS	15

BB101Standard, korlát nélkül

BB100 Standard, korláttal

BB400 Iker kivitel korláttal



1 Tervezett használat

Tervezett használat


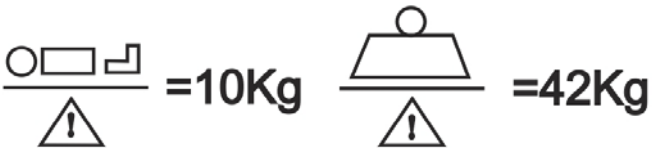
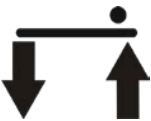







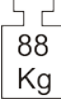

A Kanmed BabyBed alkalmas koraszülöttek és újszülöttek ergonomikus és biztonságos elhelyezésére kórházi környezetben. A Kanmed BabyWarmer rendszer BW3 vagy BW-50 tagjaival együtt is használható.

A kórházi személyzet, vagy az újszülött gondozója által kezelhető, a Használati Utasításban foglaltak, valamint a helyi, elfogadott kezelési elvek figyelembevételével. Az Eszközt csak a Használati Utasítás gondos áttanulmányozása után vegye használatba.

2 Felszólítások

- Ne tegyen felállásra képes csecsemőt/kisgyereket a Kanmed BabyBed-be, mert felállva kieshet.
- Ellenőrizze, hogy az oldalfalakat a legfelső állásban megfelelően rögzítette, mielőtt a csecsemő felügyelet nélkül marad.
- A legmagasabb állásban ne mozgassa az Eszközt. Mozgatáshoz állítsa a legalsó helyzetbe.
- Az Eszközt ne az oldalfalaknál megfogva mozgassa. Kivételtől függően a körben lévő korlátot, vagy a fogantyút használja ilyen célra.
- Lehajtott oldalfalak mellett ne hagyja a csecsemőt felügyelet nélkül.
- Vegye figyelembe a súlyhatárt.
- Ellenőrizze, hogy az eszköz stabilan áll, a kerekek és a reteszek rögzítettek.
- Ellenőrizze, hogy a magasság megváltoztatásának nincs fizikai akadály.
- Ha a sátorra nincs szükség, távolítsa el a sátorrudat.
- A sátorrúd csak a sátorhoz használható.
- Ha gyerekek, rokonok, szülők, vagy speciális ellátási igényű páciensek használhatják a lábpedált, akkor inkább kapcsolja ki az Eszközt az elektromos hálózathoz. Ellenőrizze, hogy szükség esetén viszont a Kanmed BabyBed csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
- Le-vagy felbillenhető tárgytól tartson biztonságos távolságot.
- A matrac maximális vastagsága 40 mm lehet.
- Csak a Kanmed BabyBed Használati Utasításában leírtakkal tisztában levő és azt megértett személy használhatja az Eszközt.

3 A szimbólumok leírása

	Használatbavétel előtt olvassa el a Használati Utasítást.		
Választható kivitelek:			
BB100	Standard BabyBed	BB101	Ugyanaz, korlátok nélkül
BB400	BabyBed ikreknek	BB401	Ugyanaz, korlátok nélkül
BB300	Standard BabyBed rögzített magasságú	BB301	Ugyanaz, korlátok nélkül
BB400F	BabyBed ikreknek, rögzített magasságú	BB401F	Ugyanaz, korlátok nélkül
Maximális engedélyezett súlyhatárok: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;">  </div> <p>Ágytálca, minden kivétel: Páciens(ek) súlya max. 10 kg + Vizmatrac(ok), gélmatrac(ok) együtt max. 10 kg Az ágytálca alatti fiók fedele: 2kg Az ágytálca alatti fiók: 2kg Korlát az ágy körül: Max 3,5 kg egyenként. Összesen max. 10 kg. Polc: 5kg. Hátsó rögzítő oszlopok: egyenként 3 kg. Első fogantyú: 5 kg (Oldalkorlátok nélküli kivétel)</p>			
	Szimbólum a lábpedálon, az ágy emelésére/süllyesztésére (nincs a BB300, 301 BB400F, 401F kiviteleknel)		
	Szimbólum a döntés funkcióhoz, található a tálcán.		
	Megfelel az MDD 93/42 EEC előírásoknak.		
	Földpotenciál csatlakozási pont.		
IP 30	Védelem foka (Víz- és idegentestek bejutása ellen)		
	Védelem foka Type B (test) (nincs a BB300,301 BB400F, 401F kiviteleknel)		
	Ha a BabyBed elérte élettartama végét, juttassa vissza a Márkakereskedőhöz. Az EU 2002/96/EC (WEEE) direktíváinak megfelelően, ha lehetséges.		
 20XX	Gyártás éve.	 9min/h	Magasságállítás maximális sebessége.
 88 Kg	Az Eszköz maximális súlya az engedélyezett tartozékokkal.		
	Kézsérülés veszélye.		

4 Használati Utasítás

4.1 Az első tisztítás

A Kanmed BabyBed és a tartozékok az első használatbavétele előtti, a helyi előírásoknak megfelelő tisztítása szükséges.

A részletek az **5. Fejezetben** (Tisztítás) találhatóak.

Az oldalfalak szerelési utasításai az **5. Fejezetben** (Tisztítás) találhatóak.

4.2 A stabilitás ellenőrzése

Ellenőrizze a reteszek és csavarok megfelelően szoros meghúzását, rögzítését, az ágy stabil helyzetét.

4.3 Az oldalfalak lehajtása

Az oldalfalak és az előlap a következők szerint hajthatók le.

Két kézzel fogja meg a lap két felső szélét.


Függőlegesen emelje fel (5mm) – húzza maga felé (2 cm, 1 inch) – majd óvatosan hajtja le.

A felhajtást is két kézzel végezze, kicsit nyomja előre, majd engedje le. Ellenőrizze, hogy a lapok megfelelően rögzültek.

Ellenőrizze az oldalfalak könnyű mozgathatóságát, és megfelelő állapotát.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az oldalfalak mozgatása során semmit nem csípett be, vagy szorított le.

MEGJEGYZÉS: Az oldalfalak eltávolítása – lásd az **5. Fejezetet** (Tisztítás).

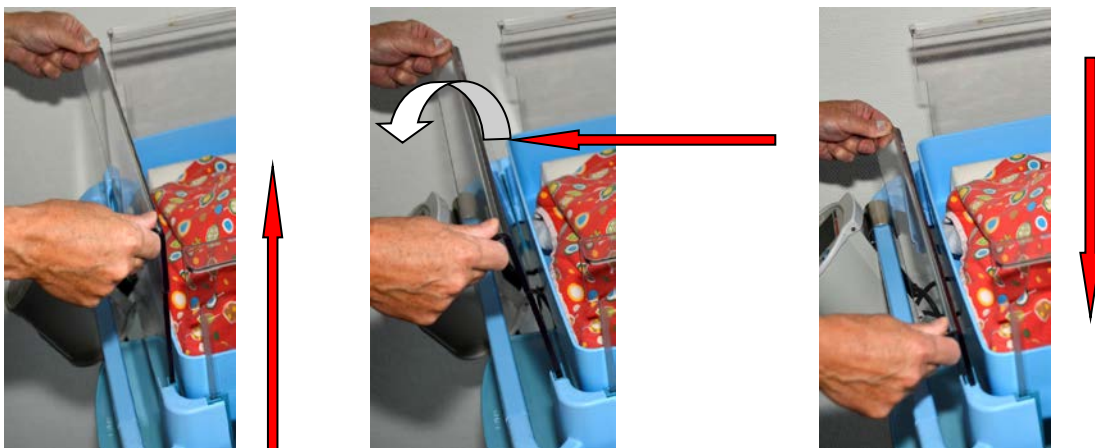

4.4 A BabyBed mozgatása

A mozgatáshoz kizárólag a korlátok, vagy a fogantyú használható.

Felszólítás: Mozgatáshoz engedje le az ágyat az alsó végállásba, különösen, ha a páciens is benne van.

MEGJEGYZÉS:

- Ne mozgassa az eszközt az oldalfalaknál fogva.
- Mozgatás előtt húzzon ki minden kábelt és csatlakozót.
- Mozgatás után rögzítse a kerekeket a fékkel.

4.5 A BabyBed csatlakoztatása elektromos hálózathoz (BB300/301, BB400F/401F NEM)

A BabyBedet földelt kábellel kell földelt csatlakozóhoz csatlakoztatni.

Úgy vezesse a kábelt, hogy abban ne lehessen megbotlani, vagy elesni.

MEGJEGYZÉS: Az elektromos lekapcsolás csak a hálózati kábel kihúzásával történhet.

Úgy helyezze el az ágyat, hogy a kábel könnyen kihúzható legyen.

FELSZÓLÍTÁS: Elektromos áramütés elkerülése érdekében kizárólag földelt csatlakozó használható.



4.6 A magasság beállítása (BB300/301 BB400F/401F NEM)

A magasság az Eszköz alján levő lábpedállal állítható. Csatlakozzon a hálózatra, majd állítsa be a magasságot, ellenőrizze, hogy a mozgás könnyű és semmilyen hangjelenség/zaj sem kíséri. A motor hangja hallható, ami egyben a fekvőfelület mozgásának jelzése/figyelmeztetése.

A lábpedálok a Készülék mindkét oldalára felszerelhetők. Előlapú pedál is létezik.



FELSZÓLÍTÁS:

A magasság változtatása előtt ellenőrizze, hogy a mozgó rész útjában nincs személy, kábel, tömlő, vagy bármely, a mozgást akadályozó tárgy, illetve a két mozgó rész közé nem csípődött be kábel, vagy bármi.

Ha gyerekek, rokonok, páciensek, használhatják a lábpedált, akkor inkább kapcsolja ki az Eszközt az elektromos hálózatról.

Az elektromos emelő bekapcsolásakor ne akadályozza annak mozgását.

4.7 Billentés/döntés

Ha az ágyat billenteni akarja, mindkét kézzel szorosan fogja meg az első korlátot, vagy a fogantyút és a jobb sarok alatt levő gombot nyomja meg.


Ugyanakkor emelje, vagy süllyessze az ágy végét a megfelelő irányba és mértékben. A gomb elengedésekor a beállított helyzet rögzül.

A maximális billentés mértékét a technikus szabályozza. L a **Technikai Fejezetet**.

Kiegészítő készlettel (BB173) a billentés funkció mértéke $\pm 17^\circ$ között, ill., Trendelenburg állítható.



Billentő retesz gomb, oldalkorlát nélküli Eszközökön.

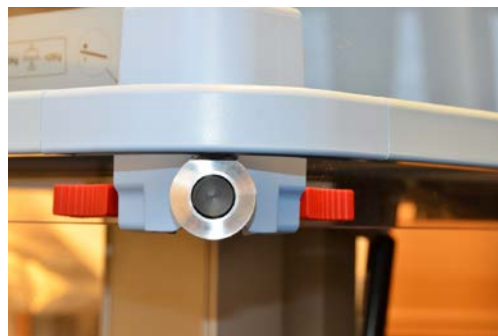

Billentő retesz gomb oldalkorláttal ellátott Eszközökön.

4.8 Sátortartó rúd, sátor és matrac

Helyezze a rudat a hátsó tartóba.

Fordítsa el 90 fokkal és nyomja le, amíg a csavarok becsúsznak a vátatba.

A sátorban bujtató található.

Csúsztassa a rudat a bujtatóba, rögzítse, majd rögzítse a sátor lapjait az ágy külső oldalán.

Helyezze a matracot az ágyba.

Más kivitelű matracok, házi készítésű sátor használata megszünteti a Kanmed felelősségét.

MEGJEGYZÉS: A sátortartó rúd 2 magasságba állítható. Ellenőrizze, a megfelelő magasságot




← Csavar helyzet: B100/101/300/301

← Csavarhelyzet: Ikerkivitel

4.9 Ágy tálca

Az ágy tálca rögzíthető a fekvőfelülethez, vagy rögzítés nélkül is használható, rendelésétől függően. Nem rögzített állapot esetén a tálca könnyen kivehető, az ágy és a tálca tisztításához.

Ha a tálcát oldhatatlanul rögzíteni kívánja a fekvő felülethez, a Cégnél rendelkezésére áll speciális rögzítő szalag.

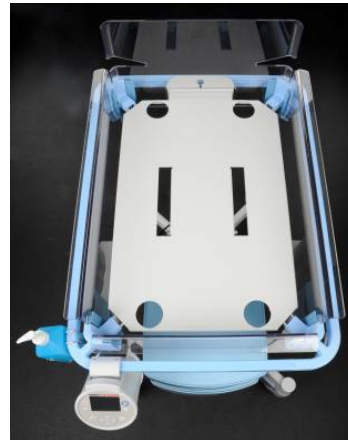

4.10 Fiókok

Fiókok, fedlappal, vagy fedlap nélkül is rögzíthetők a fekvőfelület alá.

A gyorsabb hozzáféréshez kifordíthatóak.

Használat után fordítsa vissza.

Vegye figyelembe a fiókok fedelén és a fiókban található terhelési előírásokat.



4.11 Kanmed BabyWarmer

A Kanmed BabyWarmer szabályozó egységét a tálca alján levő rúdra szerelik, annak rögzítő egységével.

A BabyWarmer rögzítésére további lehetőségek állnak rendelkezésre. Keresse fel a www.kanmed.se honlapon a BabyBed, letöltések oldalt, a keresett dokumentum neve: "possible ways".

A BabyWarmer kábelét lehetőleg a tálcan levő nyílásokon vezesse, mielőtt a szabályozó egységhez csatlakoztatja.



4.12 BabyWarmer hálózati kábel

A Kanmed BabyWarmer az elektromos hálózathoz a saját kábelével, vagy speciális rövid kábellel (Rendelészám 800-0502) a készülék oszlop felső részén levő - Lásd az ábrát – aljzathoz csatlakozik.

A Kanmed BabyWarmer alkalmazásának további részletei az Eszköz Használati Utasításában találhatóak.



4.13 Hátsó rögzítő egység

Az összes újabb ágy rendelkezik a hátsó rögzítő egységgel.

A csavarokkal ellátott rudak szabvány, 25 mm átmérőjű rozsdamentes acél csövek.

Tartozékai az Eszköznek.

A rendelési számok a **10. Fejezet**ben találhatóak.

Minden rúd terhelhetősége: 3 kg



4.14 Opcionális polc

A fiókok helyett rendelhető

Rendelészám: 800-0530



4.15 Egyéb tartozékok

A Kanmed BabyBed tartozékok szerelési és használati javaslata a hozzájuk mellékelt leírásban található. A terhelhetőségi határok a **3. Fejezet**ben találhatóak.

További tartozékok felhasználása gondos mérlegelést kíván, a súlyhatárok, az alkalmazhatóság, az ágyhoz való rögzítés lehetőségei függvényében. A Kanmed csak az általa szállított tartozékok kapcsán tartozik felelősséggel.

Minden Kanmed BabyBed tartozék a www.kanmed.se honlapot található, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Márkakereskedővel.

5 Tisztítás

Általános információ

Az ágyat és a tartozékokat minden páciens után gondosan meg kell tisztítani. Kövesse a dezinficiálásra és a tisztításra vonatkozó helyi rendeletek és előírásokat.

Tisztítás előtt és után is ellenőrizze minden részegység állapotát, működőképességét.

A Kanmed által ajánlott tisztító- és dezinficiáló szerek listáját a következőkben találja. A listában nem szereplő vegyületek alkalmazása, vagy a tisztítás túlzásba vitele csökkentheti egyes-, vagy mindegyik részegység élettartamát. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a Márkaszervizzel.

Az oldalfalak környezetbarát PET-ből készülnek, ellenállnak minden tisztító- és dezinficiáló oldatnak. Ne használjon klórt, vagy oldószert.

Tisztítás: Használjon szappanos vizet.

Dezinficiálás: A Kanmed BabyBed ellenáll a leggyakoribb, kórházakban alkalmazott felület fertőtlenítő anyagnak, mint: Virkon®, Diversey Limpiador Colorado, Clinell törlőkendő, Chlor Clean törlőkendő, Meliseptol® rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® és hasonlók.

Kétség esetén próbálja ki a szert a Készülék kis felületén, vagy vegye fel a kapcsolatot a Márkaszervizzel.

SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK

5.1 Az ágy tisztítása

Használjon nedves textíliát.

MEGJEGYZÉS: Kanmed BabyBed bármilyen folyadékkal való „lezuhanyozása” minden körülmények között tilos.

Ne tisztítsa fertőtlenítő kamrában.

5.2 Az ágy tálca

Az ágy tálca normál esetben nem rögzített. Ezért helyéről könnyen kiemelhető tisztításhoz, így a fekvőfelület is könnyen hozzáférhető a tisztításhoz.

5.3 Az oldalfalak tisztítása


Távolítsa el az oldalfalakat.

A piros rögzítőket tolja befelé, az oldalfal reteszelés feloldására, majd emelje azt fel.

Az oldalfal reteszelésére tolja kifelé a piros rögzítőket.

Ne tegye az oldalfalakat mosogatógépbe.

Az oldalfalak tisztításához ne használjon dörzsölő hatású anyagot.

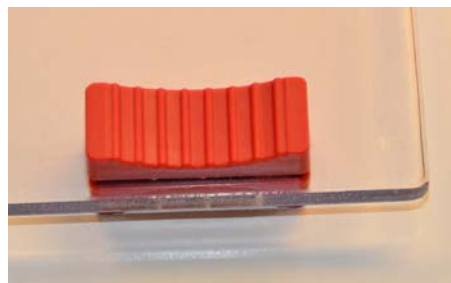

5.4 Az oldalfalak visszahelyezése

Csúsztassa az oldalfalat a helyére, majd tolja a piros rögzítőt kifelé.

Az oldalfal felső, meghajlított szélének kifelé kell néznie.

5.5 Fiókok és fedlapok

A fiókokat és a fedlapokat ugyanúgy tisztítsa és dezinficiálja, mint az ágy többi részét.

5.6 Matracok

A Kanmed által javasolt felületi tisztító- és fertőtlenítő szerek közül használjon.

5.7 Sátor

Tartsa magát a sátor címkéjén található előírásokhoz.

Ha a sátor szennyeződött, kimosható 90°C-on, de az anyag összemehet és hamarabb elhasználódik.

6 Használat előtti rendszeres biztonsági ellenőrzés

Általános

Ellenőrizze minden részegység megfelelő állapotát, figyeljen esetleges elszíneződésre, repedésre. A nem megfelelő állapotú részeket cserélje ki.

Ezen kívül évenkénti, rendszeres karbantartás javasolt. L. **Technikai Fejezetet**.

Ajánlott ellenőrzés használat előtt	Elvégzi	Mikor	Kiegészítő információ
Oldalfalak működése	Felhasználó	Használat előtt	Ellenőrizze, hogy könnyen emelhetőek, süllyeszthetőek, felső állásban megfelelően, biztonságosan rögzíthetőek.
Billentés	Felhasználó	Használat előtt	A mozgatás könnyű és akadálytalan, a beállított helyzet biztonságosan rögzíthető.
Kábelek és csatlakozók	Felhasználó	Naponta	Ellenőrizze a megfelelő állapotot.
Stabilitás és integritás	Felhasználó	Naponta	Ellenőrizze az ágy megfelelő/jó állapotát, stabilitását, minden funkció megfelelő működését.
Kanmed BabyWarmer	Felhasználó		L. Kanmed BabyWarmer Használati Utasítását.
Kerekek / fékek	Felhasználó	Használat előtt	

7 Hibakeresés

Tünet	Lehetséges ok	Tennivaló
Az emelő oszlop nem megfelelően működik. (nem érvényes BB300,301 és BB400F, 401F kivitelekre)	Nincs hálózati feszültség	Ellenőrizze a hálózati kábelt és az aljzatot.
	Valami akadályozza a mozgást.	Ellenőrizze, nincs-e akadály.
	Elektromos csatlakozási hiba.	Technikai segítség
	Lámpedál hiba, vagy kábel csatlakoztatási hiba.	Technikai segítség
Az ágy nem billenthető. Végállásban rögzül. A beállított helyzetben nem rögzíthető.	A szabályozás hatástalan, vagy be kell állítani.	Technikai segítség
	Valami akadály alakult ki.	Ellenőrizze a rendszert.
Az ágy ingatagnak látszik.	Laza csavarok vagy kerekek.	Technikai segítség
A magasságszabályozás kifejezett zajjal jár.		Technikai segítség
Az oldalfal mozgatáskor szorul.	Nem megfelelően tették helyre	Ellenőrizze az elhelyezést.

8 Technikai adatok

	BB100 / 101 standard BB300 / 301 fix magasság		BB400 / 401 iker kivitel BB400F / 401F fix magasság	
Külső méretek	Oldalkorlátokkal 85cm X 63cm	Oldalkorlát nélkül 83cm X 53cm	Oldalkorlátokkal 95cm X 80 cm	Oldalkorlát nélkül 93 cm X 70 cm
Ágytálca Belső méretek	690mm X 465mm X 90 mm Anyaga PP		765mm X 640mm X 90mm Anyaga PP	
Ágytálca alja ma- gassága a földtől	Min 78 cm, Max 108 cm. Rögzített magasság 80cm 9,5 cm dupla kerekes kivitel esetén a magasság 4 cm-rel kevesebb.			
Súly	Kb. 46 kg Rögzített magasság esetén kb. 36 kg		Kb. 52 kg Rögzített magasság esetén kb. 42 kg	
Kerék alapterület	64 cm X 87 cm			
Kerekek	Átmérő 125mm rögzíthető kivitel, vagy 9,5 cm dupla kerekes rögzíthető kivitelé			
Billentés	Kb. 17 fok. Opció: ±17 fok			
Matracok	Puha habbal borítva.			
Sátor	Mosható 60°C (90°C)			
Fiók	320mm X 330mm X120mm, Fedlap 320 X 330mm			
Színek	Unisex világoskék minden műanyag rész. Kerekek és fém részek világosszürkék.			
Feszültség BB100/400	230V 50Hz / 60Hz vagy 115V 60Hz, 150VA			
Biztosíték BB100/400	2xT6,3A 230V. Csak ugyanolyan/azonos paraméterű biztosítókkal cserélhető.			
Elektromos csatlakozó az oszlopon BB100/101 és BB400/401:	Max 300W			
Védelem BB100/101/400/401:	Class I			

Megváltoztatás FELSZÓLÍTÁS	A Kanmed BabyBed bármilyen, a Cég előzetes írásbeli engedélye nélküli megváltoztatása teljesen megszünteti a Kanmed felelősségét.
Rendszer összeállítás	Bárki, aki a Kanmed BabyBed-t más rendszer elektromos hálózatához csatlakoztatja, az IEC 60601-1 Fejezet 16. Pontja értelmében „Rendszert” állít össze. Minősítettnek kell lennie, annak eldöntésére, hogy az így létrejött rendszer nem károsíthatja a páciens, a személyzetet, vagy az eszközt.
Várható élettartam	A Kanmed garantálja az eszköz 10 éves élettartamát, az első üzembehelyezéstől számítva. Abban az esetben, ha az Eszközt a Használati Utasításban leírtaknak megfelelően használták, gondozták, engedély nélkül semmilyen módon és/vagy célból nem módosították, vagy változtatták.

A termék CE-jelzett.

Megfelelő: UL 60601-1

Környezeti adatok:

Működés közben: +10 - + 40°C, <85% relatív páratartalom

Szállítás közben: -20 - +60°C, nem kondenzálódó.

Tárolás során: +10 - +40°C, nem kondenzálódó.

Légnyomás: 70 - 106 kPa

9 Technikai Fejezet – Szerviz és karbantartás

MEGJEGYZÉS: Csak a Kanmed, vagy az általa feljogosított szállító alkatrészei használhatóak. Nem ebbe a körbe tartozó rész használatakor az üzemeltetés felelőssége azonnal és automatikusan a Kórházra száll át. Javítást kizárólag minősített szakember végezhet. Semmilyen javítás nem végezhető, amíg a páciens az ágyban van.

9.1 Éves ellenőrzések / karbantartás

Évente legalább egyszer ellenőrizze a következőket:

- A kábelek és a csatlakozó aljzatok sérülésmentesek.
- Az oldalfalak nem repedtek, vagy sérültek.
- Ellenőrizze a sarkokat, a műanyag ép, csavarok rögzítve? Figyelem: Speciális műanyag csavarok.
- Ellenőrizze az oldalfalak csúszkáit.
- Ellenőrizze, hogy az oldalfalak könnyen le- és felhajthatóak és kivehetőek.
- Ellenőrizze, hogy a lábkapcsoló késlekedés nélkül működik, az emelés, süllyesztés gond nélkül kivitelezhető, a működést szokatlan hangjelenség nem kíséri, a kábel sértetlen.
- Ellenőrizze a billentés zavartalanságát, semmilyen hang nem kíséri a beállítást.
- Ellenőrizze, hogy a gázrugóhoz és a billentő reteszhez vezető drót sértetlen.
- Ellenőrizze a kerekek sértetlenségét, megfelelő rögzítettségét, a mozgatás könnyű- és akadálymentességét, a kerekek befékezhetőségét.
- Ellenőrizze, hogy minden csavar szorosan rögzített, különösen a magasságállító résznél, a gázrugónál, a fekvő felület rögzítésénél.
- Ellenőrizze, hogy a lábpedál címke nem kopott.
- Ellenőrizze, hogy az ágytálca címkéi nem kopottak.

Szerviz

MEGJEGYZÉS

Az eszközön végzett bármilyen beavatkozás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Minden javítás után végezzen teljes funkcionális ellenőrzést.

9.2 A billentés funkció retesz szabályozása / Gázrugó

Hidraulikus billentés retesz

Ha az Eszköz manuális billentésű opciójú, akkor a Használati Utasítás szerviz információi közül az 1 verzió érvényes.

Hozzáférhető a www.kanmed.se honlapon.

A hidraulikus átépítés egyszerű beavatkozás, – vegye fel a kapcsolatot a Márkakereskedővel.

A gomb megnyomásával aktiválja a rögzítő tuskét, ami a gázrugó felső végénél található. Lásd a piros nyilat.

Ha a billentés egyáltalán nem működik, vagy a rögzítés nem elég szoros, akkor a funkciót be kell szabályozni.

Oldja a gázrugó alsó bekötését, és húzza ki a gázrugót tartó csavart (Lásd az alsó piros nyilat).

Billentés nem kivitelezhető: Fordítson egy fordulatot a gázrugón befelé, majd rögzítse az eredeti állapotnak megfelelően a gázrugót.

Ellenőrizze a billentés könnyű végrehajthatóságát, és a rögzítés szilárdságát a gomb elengedése után. Ha nem elég, fordítson még egyet a gázrugón.

Billentett állapot nem rögzíthető: Fordítson egy fordulatot a gázrugón kifelé, majd ellenőrizze a funkciót. Végezzen végső ellenőrzést, majd szorítsa meg a csavarokat.



9.2.1 A billentés funkció mérték szabályozása.

A billentés határolás mértéke szabályozható, a gázrugó alsó befogási hely megváltoztatásával.

Ellenőrizze a megfelelő rögzítést.

Szerelő készlet áll rendelkezésre a billentés ± 17 fokig kiterjesztésére.

9.3 Az oldalkorlát cseréje, vagy a sarok beállítása

Lásd a pótalkatrészek rendelési számát a listában. Az oldalkorlát sarkok két (2) speciális műanyag csavarral rögzíthetőek alulról. A nyílások ovális alakúak a korlát és az oldalfal pontos illesztésére. Ajánlatos 2 sarok csavarjait eltávolítani, új sarkok, vagy oldalkorlátok felszerelésekor.

Kizárólag Kanmed No. 700-0880 csavart használjon, mert más csavarok rögzítő ereje nem elegendő. A csavar ugyanabba a műanyag nyílásba 6 alkalommal csavarható be és ki.

9.4 Fiókok, polcok fel-, leszerelése, beállítása

Lazítsa meg a polctartó csavarjait. (Ha szükséges, távolítsa el a hátulsó díszítő szalagot). Mozgassa az új helyre és szorosan húzza meg a csavarokat.

További fióktartó fel-, vagy leszerelése: Emelje meg a tartó oszlopot több, mint 5 cm-rel. Tolja le az oszlop alján körbefutó fekete szegélyt. Így már be-, kiveheti a tartó tuskéket.

Ha fiókokat épített be, ellenőrizze, hogy az előlap megfelelően lehajtható.

Vágjon le megfelelő méretű műanyag díszítő szalagot. Új szalagok rendelhetőek a Márkakereskedőtől.

9.5 A lábpedál / elektromos csatlakozások cseréje

Fektesse az ágyat óvatosan az oldalára. Húzza ki a pedált az oszlopból. Csavarozza ki a lábpedált és cserélje ki. Állítsa fel az ágyat és ellenőrizze a pedál megfelelő működését.

9.5 1 További-, vagy első oldali lábpedál csatlakoztatása.

Vegye fel a kapcsolatot a Márkaszervizzel a szükséges információk és részek miatt.

9.6 Az elektromos állítású oszlop cseréje

Elektromosan emelje fel az oszlopot kb. 5 cm-rel, ha lehetséges.

Húzza ki a hálózati csatlakozót.

Vegye ki a matracokat, az oldalfalakat és az ágytálcát.

Szerelje le a fiókokat. Tolja le az oszlop alján körbefutó fekete szegélyt. Vegye le a műanyag szalagokat, ekkor levehetőek a tartozékokat tartó fém tuskék. Ha az oszlop nem mozgatható, új tuskéket kell rendelnie.

Szerelje ki a gázrugót.

Lazítsa meg a fekvő felületet rögzítő csavarokat. A két csavar szorosan meghúzott, oldása-, újra szorítása minőségi szerszámot igényel. Figyeljen a földelő kábelre.

Lazítsa meg a központi oszlop tetején levő csavarokat, az ágykeret eltávolításához. Figyeljen az alul vezetett földelő kábelre.

Csatolja szét a magasság szabályozót.

Fordítsa le az oszlopot/ágyat.

Csavarja ki a földelő aljzatot. (Régebbi modellek)

Vegye ki a földelő kábelt az ágy alól. (Régebbi modellek)

Lazítsa meg az alsó csavarokat és távolítsa el a lábpedált.

Csavarja ki az oszlopot. Figyeljen a földelő kábelre.

Összeállítás – az ellenkező sorrendben.

Végezzen teljes funkcionális ellenőrzést, elektromos biztonsági ellenőrzést, bizonyosodjon meg, hogy a fekvő felület megfelelően földelt.

10 Pótalkatrészek /Tartozékok

Azonosító	Termék	Kiegészítő információ
BB112	Ágy alatti BabyWarmer tartó	Szerelési utasítással. 2018 előtt 7 mm furat kell az ágyra. Egyes, vagy iker ágy! BW3-hoz BW3-0837 polctartó kellhet.
800-0116	Oldalfal hátsó BB101/301	Magasság 25 cm. Ágy, oldalkorlással. Kivágás tömlőknek.
800-0117	Oldalfal hátsó BB401/401F	Magasság 29 cm. Ágy, oldalkorlát nélkül. Kivágás tömlőknek.
800-0118	Oldalfal hátsó BB100/BB300	Magasság 25 cm. Kivágás tömlőknek.
800-0119	Oldalfal hátsó BB400/400F	Magasság 29 cm. Kivágás tömlőknek.
800-0010	Oldalfal hátsó BB100/BB300.	Magasság 29 cm, Kivágás tömlőknek.
800-0105	Oldalfal hátsó BB101/BB301	Magasság 25 cm. Ágy, oldalkorlát nélkül. Nyílás tömlőknek.
800-0042	Oldalfal hátsó BB400/400F	Magasság 29 cm. Kivágás tömlőknek.
800-0109	Oldalfal hátsó BB401/401F	Magasság 25 cm Ágy, oldalkorlát nélkül. Kivágás tömlőknek.
800-0077	Oldalfal bal/jobb BB100/BB300	Magasság 29 cm
800-0101	Oldalfal bal/jobb BB101/BB301	Magasság 25 Ágy, oldalkorlát nélkül.
800-0079	Oldalfal bal/jobb BB400/BB400F	Magasság 29 cm
800-0107	Oldalfal bal/jobb BB401/401F	Magasság 25 Ágy, oldalkorlát nélkül.
800-0076	Oldalfal előlap BB100/BB300	Magasság 29 cm
800-0100	Oldalfal előlap BB101/BB301	Magasság 25 cm Ágy, oldalkorlát nélkül.
800-0078	Oldalfal előlap BB400/BB400F	Magasság 29 cm
800-0108	Oldalfal előlap BB401/401F	Magasság 25 cm Ágy, oldalkorlát nélkül.
800-0072	Oldalfal rögzítő piros	Készlet: 4 db.
800-0023	Oldalkorlát első/hátsó BB100/BB300	Hossz 40 cm
800-0022	Oldalkorlát oldal BB100/BB300	Hossz 62 cm
800-0044	Oldalkorlát első/hátsó BB400/BB400F	Hossz 57,7 cm
800-0045	Oldalkorlát oldal BB400/BB400F	Hossz 72,3 cm
800-0110	Sarok BB100-400	2 csavar, borítás a fogantyú alatt. Ágy, oldalkorlással.
800-0098	Sarok fogantyú BB101-401	2 csavar. Ágy, oldalkorlát nélkül .
700-0880	Sarok csavarok	Csak ezeket a speciális csavarokat használja.
800-0004	Baby tálcá BB100/BB300	BB101/301-hoz is.
800-0041	Baby tálcá BB400/BB400F	BB401/401-hoz is.
800-0002	Fiók	Minden ágy modellhez
800-0013	Fiók tartó	Készlet retesszel és csavarokkal.
800-0001	Fiók fedlap	Minden ágyhoz.
800-0003	Kerék borítás	Minden ágyhoz.
800-0501	Lábpedál	Cseréhez. Kábellel, címkével. Konzol nélkül.
800-0029	Retesz túske oszlop tartozékokhoz	Átmérő 7 mm, hossz 30 mm csavar M5. Csavarral.
700-0874	Kerék, fékkel.	Standard minden ágyhoz.
700-0884	Kettős kerék, 95mm, rögzíthető	Opció. Új ágyhoz rendelve ára: 200/db.
800-0048	Elektromos emelő egység 230V	Csak BB100 - 401F ágyakhoz.
800-0526	Elektromos emelő egység 115 V	Csak BB100 - 401F ágyakhoz.
800-0506	Gázrugó	Standard +17° döntésű ágyakhoz.
BB172	Hidraulikus billentő készlet	Mechanikus döntésű ágyak átszereléséhez.
800-0519	Hidraulikus gázrugó szabályzó egység	A hibás egység cseréjéhez.
800-0528	Felengedő gomb (fekete)	Csomag: 5 db. LockTite ragasztóval rögzíteni kell.
700-0879	O-gyűrű fiókhoz	
800-0301	Fix méterű oszlop (530mm)	
800-0520	Rögzítő fogantyú.	800-0527-hoz

11 Garancia

Kanmed garantálja a vásárlónak a Kanmed BabyBed anyag- és kidolgozási hibamentességét, a szállítástól számított **5 évig**.

A garancia nem vonatkozik a műanyag részekre, a matracokra, a kábelekre, a sátorra.

A Kanmed kizárólagos döntési joga a hibás rész javítása új-, vagy felújított alkatrészsel, a teljes Eszköz cseréje, vagy a vételár visszafizetése.

A garancia érvényét veszti az eszköz előzetes, írásbeli engedély nélküli megváltoztatása, nem szakképzett szerelő általi javítása, nem megfelelő karbantartása esetén. Szintén érvénytelen a garancia az eszköz nem megfelelő használata, gondatlanságra visszavezethető sérülése esetén.

Garanciális panaszt a garanciaidőn belül azonnal jelezni kell a Kanmed-nek, vagy a helyi Márkakereskedőnek.

A Kanmed jogosult elbírálni a hiba meglétét.

A Kanmed semmi módon nem felelős a garancia megszűnéséből eredeztethető kárért, vagy sérülésért.

12 EMC tanúsítványok

A BabyBed teljesíti az IEC 60601-1-2:2007 elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó alkalmazható elvárásokat.

A BabyBed használható kórházi környezetben, de nagyfrekvenciás sebészeti eszközök, MRI berendezés közelében nem.

FELSZÓLÍTÁS: Nem a Cég által szállított-, vagy a Készülékhez engedélyezett tartozékok, kábelek növelhetik a Készülék elektromágneses emisszióját, csökkenthetik az elektromágneses immunitását, nem megfelelő működést eredményezhetnek.

FELSZÓLÍTÁS: Hordozható RF kommunikációs eszközök (mobil telefon, rádió transzmitter, antenna kábel, külső antenna) nem lehetnek 30 cm-nél közelebb a BabyBed bármely részéhez, beleértve az előálító által megadott kábeleket is. Ellenkező esetben a Készülék nem megfelelően működhet.

MEGJEGYZÉS: A Készülék EMISSZIÓS tulajdonságai lehetővé teszik annak ipari területeken és kórházakban való használatát (CISPR 11 class A). Lakókörnyezetben való használat során (ahol CISPR 11 class B feltétel érvényes) a Készülék esetleg nem megfelelően védett rádiófrekvenciás zavarokkal szemben. A felhasználó zavarcsökkentő lépésekre kényszerülhet (a Készülék áthelyezése, az elhelyezés irányának megváltoztatása).

Az EMC megfelelésséggel kapcsolatos további részletes információkért forduljon a helyi Márkakereskedőhöz.

13 Hulladékkezelés



Ha a Kanmed BabyBed elérte üzemideje végét, akkor az EU 2002/96/EC (WEEE) direktívában leírtaknak megfelelően járjon el a termék kezelésével kapcsolatban.



KANMED^o
a MedCare Visions[®] company

Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden

Telephone +46 8 56 48 06 30

E-Mail: info@kanmed.se

Web page: www.kanmed.se

A Készüléket kizárólagos joggal forgalmazza, garanciaidőn belül-, illetve későbbi szervizét ellátja
a:

TRIMUS Kft
H-1156 Budapest
Páskomliget 69.
Tel/fax.: 1 410 1148
+36209838646
trimus@t-online.hu
www.trimus.hu

KANMED^o
a MedCare Visions[®] company

Kanmed AB

Gardsfogdevägen 18 B
16867 Bromma

E-Mail info@kanmed.se

Telefon +46 85 64 80 630