

Manuale d'uso

KANMED[®] BABYBED



CE

Art no: BB100-401F-076 ver 4 IT
2019-05-28

Attenzione

Si prega di leggere attentamente questo manuale. L'uso improprio può causare lesioni al paziente o all'utente.

Prodotto da:
KANMED AB
www.kanmed.se



Questo manuale è valido per tutti i BabyBed prodotti da Kanmed e consegnati da gennaio 2017

Contenuti

1 DESCRIZIONE GENERALE / DESTINAZIONE D'USO	3
2 AVVERTIMENTI	3
3 DESCRIZIONE DEI SIMBOLI.....	4
4 ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO.....	5
5 PULIZIA	9
6 CONTROLLI DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO	10
7 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	10
8 DATI TECNICI.....	11
9 SEZIONE TECNICA - ASSISTENZA E MANUTENZIONE.....	12
10 ACCESSORI/PARTI DI RICAMBIO	14
11 GARANZIA	15
12 COMPATIBILITÀ EMC.....	15
13 SMALTIMENTO	15

BB101Standard senza barre laterali BB100 Standard con barre laterali BB400 gemellare con barre laterali



1 Uso previsto

Uso previsto


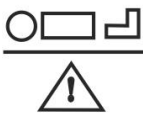

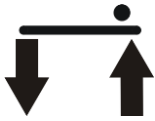







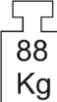

La destinazione d'uso del Kanmed BabyBed è di fornire un lettino ergonomico e sicuro, ideale per i neonati a termine e prematuri in ambiente ospedaliero. È destinato ad essere utilizzato anche con i sistemi Kanmed BabyWarmer BW3 o BW-50.

È destinato ad essere utilizzato da personale ospedaliero o da personale qualificato per la cura del bambino secondo le istruzioni fornite in questo manuale e secondo la routine clinica di reparto. Solo il personale che è stato istruito all'uso del Kanmed BabyBed è autorizzato a utilizzare il prodotto.

2 Avvertimenti

- Non utilizzare Kanmed BabyBed con neonati/bambini piccoli che siano in grado di muoversi in modo tale che essi possano cadere/uscire dal letto.
- Assicurarsi che le pareti laterali siano bloccate nella posizione più alta quando il bambino rimane incustodito
- Non spostare/movimentare il BabyBed con il carrello ad altezza elevata. Utilizzare sempre la posizione più bassa.
- Non utilizzare le pareti laterali per spostare il letto - usare sempre le guide laterali o la maniglia frontale.
- Non lasciare il bambino incustodito con le pareti laterali abbassate.
- Rispettare i limiti di peso.
- Verificare che il letto non sia traballante e che le ruote e tutte le viti siano serrate.
- Assicurarsi che non ci siano persone o cose nell'area del movimento quando si cambia l'altezza.
- Rimuovere il palo per la Tenda se il letto è utilizzato senza una tenda.
- Il palo per la Tenda deve essere utilizzato solo per la tenda.
- Se bambini, parenti dei pazienti, o pazienti con bisogni speciali rischiano di premere / giocare con il pedale, scollegare l'alimentazione dell'altezza variabile. Assicurarsi che il Kanmed BabyWarmer sia ancora alimentato.
- Mantenere la distanza di sicurezza con altri prodotti che possono spostarsi verso l'alto o verso il basso.
- Lo spessore massimo del materasso utilizzabile è di 40mm
- Solo le persone che sono state istruite all'uso del Kanmed BabyBed sono autorizzate a utilizzare il prodotto.

3 Descrizione dei simboli

	Leggere il manuale prima dell'uso.		
Kanmed BabyBed è disponibile in 8 versioni:			
BB100 BB400 BB300 BB400F	BabyBed Standard BabyBed Gemellare BabyBed con altezza fissa BabyBed con altezza fissa Gemellare	BB101 BB401 BB301 BB401F	Uguale ma senza barre laterali Uguale ma senza barre laterali Uguale ma senza barre laterali Uguale ma senza barre laterali
<p>Massimi carichi di lavoro in sicurezza consentiti:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>=10Kg</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>=42Kg</p> </div> </div> <p>Piano del letto, per tutte le versioni: Bambino (i) peso totale 10 kg + Materassino (i) ad Acqua, Materassi in Gel o altri materassi, 10kg in totale Coperchio del Box Portaoggetti sotto il piano del letto: 2kg Box Portaoggetti sotto il piano letto: 2kg Barre laterali attorno al letto: Max. 3,5 kg su ogni barra. Max. 10 kg in totale su tutte le barre contemporaneamente Mensola: 5Kg. Kit pali di supporto posteriori: 3 Kg ogni palo Maniglia frontale: 5 Kg (modelli senza barre laterali)</p>			
	Simbolo sul pedale per alzare e abbassare il piano del letto (non per BB300,301 e BB400F/401F)		
	Simbolo per la funzione di inclinazione, si trova sull'etichetta sul piano del letto		
	Soddisfa la normative MDD 93/42 EEC		
	Punto di connessione di terra equipotenziale.		
IP 30	Grado di protezione (contro l'ingresso di acqua e corpi estranei)		
	Grado di protezione Tipo B (Corpo) (non per BB300,301,400F,401F)		
	Quando il lettino raggiunge la fine della sua vita, deve essere restituito al distributore per il riciclaggio in conformità con l'UE 2002/96/CE (RAEE), se applicabile.		
 20XX	Anno di costruzione.	 9min/h	Massimo tempo d'uso ininterrotto in minuti della Colonna Elettrica
 88 Kg	Peso totale del letto quando caricato con il peso max. consentito.		
	Rischio di infortunio alla mano		

4 Istruzioni per l'uso

4.1 Prima pulizia

Il lettino Kanmed BabyBed ed i suoi accessori devono essere puliti secondo la vostra routine ospedaliera. Si prega di fare riferimento alla sezione **5 Pulizia** prima di utilizzarlo con un paziente. Vedere la sezione 5 per il montaggio delle pareti laterali, ecc.

4.2 Controllare la stabilità

Assicurarsi che tutti i bulloni e le viti siano serrati correttamente e che il letto sia stabile.

4.3 Abbassare le Pareti Laterali

Le pareti laterali e la parete anteriore sono abbassabili nel seguente modo:

Usare entrambe le mani e afferrare i bordi superiori.


Sollevare (5mm, ¼ di pollice) - tirare verso di sé (2 cm, 1 pollice) - spingere delicatamente verso il basso.

Assicurarsi che siano correttamente in posizione.

Assicurarsi che tutti i pannelli laterali si muovano correttamente e siano in buono stato.

NOTA: Controllare che nulla venga intrappolato quando si abbassano o si alzano le pareti laterali.

NOTA: Rimozione delle pareti laterali - vedi sezione **5 Pulizia**

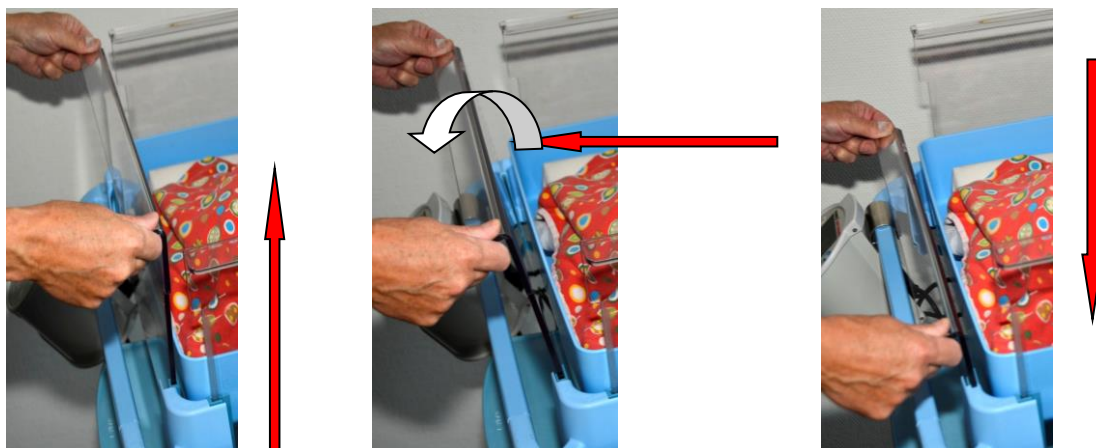

4.4 Movimentazione del lettino

Per movimentare il lettino usare sempre le barre laterali o la maniglia frontale.

Attenzione: Utilizzare il lettino alla minima altezza durante lo spostamento o il trasporto, soprattutto con un bambino dentro.

NOTA:

- Non utilizzare le pareti laterali per lo spostamento del letto.
- Non dimenticare di scollegare tutti i cavi prima di spostarlo.
- Utilizzare i Freni delle Ruote quando letto non deve essere spostato.

4.5 Collegare il BabyBed alla corrente

(non per BB300, 301 e BB400F,401F)

Il lettino deve essere collegato ad una presa di terra tramite un cavo di messa a terra. Far passare il cavo in modo che nessuno possa impigliarsi o cadere a causa di esso.

NOTA: L'unico modo per scollegare l'alimentazione è quello di disconnettere il cavo alla base della Colonna o dalla presa a muro.

Posizionare il letto in modo che il cavo possa essere facilmente scollegato.

AVVERTENZA: Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve solo essere collegato ad una rete con la protezione di terra.



4.6 Regolazione dell'altezza

(non per BB300, 301 e BB400F,401F)

L'altezza è regolabile premendo il pedale sul carrello.

Collegare l'alimentazione ed muovere il lettino in su e giù per garantire che si muova senza intoppi, senza rumori insoliti.

Il rumore del motore, è un indicazione/avviso che la base del letto si sta muovendo.



Il comando a pedale può essere montato sia a destra sia a sinistra o anche il pedale frontale.

ATTENZIONE:

Quando si cambia l'altezza, assicurarsi che nessuna persona, cavi o altri elementi impediscano il movimento e che nessun cavo si inceppi o venga avvolto tra la colonna e il carrello o da qualche altra parte. Verificare prima e premere solo una volta il pedale!

Se bambini, parenti o pazienti sono a rischio di giocare con il pedale, scollegare l'alimentazione.

Assicurarsi che il Kanmed BabyWarmer sia ancora alimentato.

Non bloccare i movimenti quando si attiva la regolazione elettrica.

4.7 Inclinazione

Quando si inclina il letto, afferrare saldamente la barra o la maniglia frontale con entrambe le mani e premere pulsante di comando sotto l'angolo destro.

Allo stesso tempo, premete il letto verso il basso o verso l'alto finché non viene raggiunta l'inclinazione desiderata. Rilasciare la comando.

Angolo di inclinazione massima può essere regolata da un tecnico. Vedere la sezione tecnica.

E' disponibile un kit di aggiornamento per la funzione di inclinazione da + o - 17 gradi, per la posizione di Trendelemburg. Art. BB173



Pulsante di comando inclinazione per i modelli con barre laterali




Pulsante di comando inclinazione per i modelli senza barre laterali

8 Palo tenda, Tenda e Materassino

Montare il Palo Tenda nella staffa posteriore.
Girarlo con un angolo di 90 gradi rispetto al letto e premere in modo da far passare le viti nella sede.
La tenda ha un canale cucito interno.
Infilare il Palo Tenda nel canale in modo da fissarlo e posizionare i lati della tenda all'esterno delle pareti laterali.
Posizionare il materasso nel letto.
Altri tipi di materasso e tende fatte in casa annullano la responsabilità legale di Kanmed.



NOTA: Il palo per la tenda ha 2 posizioni per l'altezza. Verificare che stiate utilizzando il palo per la tenda corretto.

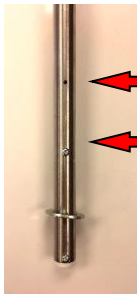

← Vite di stop in posizione per B100/101/300/301

← Vite di stop in posizione per versioni con letto gemellare

4.9 Vassoio per il materassino

Il vassoio per il materassino può essere fissato alla piattaforma del letto o appoggiato, a seconda della vostra scelta.

Avere il vassoio per il materasso appoggiato permette di sollevarlo facilmente per la sua pulizia ed anche per la pulizia della piattaforma letto.

Kanmed fornisce un nastro adesivo speciale nel caso in cui si desideri fissare in modo definitivo il vassoio per il materassino alla base della piattaforma.




4.10 Cassettiera

Le cassettiere con o senza coperchio possono essere montate sotto il piano letto.

Possono essere ruotate per una più facile accessibilità.
Ruotarla per chiuderla dopo l'uso.

Rispettare i limiti di carico riportati sul coperchio ed all'interno delle cassettiere.

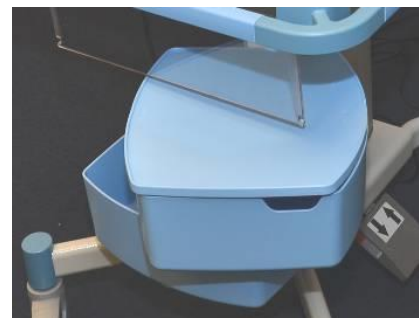

4.11 Kanmed BabyWarmer

L'unità di controllo del BabyWarmer di Kanmed è solitamente posizionata sulla barra sotto il lettino tramite il morsetto regolabile.

Ci sono diversi altri modi per montare il BabyWarmer sul lettino.

Per favore fare riferimento a

www.kanmed.se <<http://www.kanmed.se>>,

sezione BabyBed, Downloads.

Il documento è intitolato "Possible ways to mount BW3 to BabyBed"

il cavo del Pad Riscaldante attraverso uno dei fori nel vassoio per il materassino prima di collegarlo all'Unità di Controllo



4.12 Cavo di alimentazione BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer è collegato alla rete elettrica dal proprio cavo o da uno speciale cavo corto (Art. 800-0502) da collegare alla parte superiore della colonna – vedere figura sotto –

Fare riferimento al manuale Kanmed BabyWarmer per ulteriori informazioni circa l'uso del Kanmed BabyWarmer.



4.13 Kit di supporto posteriore

Tutti i nuovi lettini sono equipaggiati della staffa di montaggio posteriore.

Le aste con vite di stop sono accessori opzionali.

Sono tubi in acciaio inossidabile con diametro 25mm

I codici per l'ordine li trovate nella sezione 10

Carico massimo per ogni palo: 3 Kg



4.14 Mensola opzionale

In alternativa alla Cassettiera è possibile ordinare una mensola.

Art. 800-0530



4.15 Altri accessori

Gli accessori Kanmed devono essere montati e utilizzati secondo le istruzioni fornite assieme alle parti. Rispettare i limiti di peso indicati nella Sezione 3

L'aggiunta di altri accessori necessita di attenta considerazione in merito ai limiti di peso, idoneità, fissaggio al letto, ecc.

Kanmed può essere ritenuta responsabile solo per gli accessori forniti da Kanmed.

Per gli accessori Kanmed consultate il sito www.kanmed.se o contattate il vostro distributore locale.

5 Pulizia

Informazioni generali

Il Lettino e gli accessori devono essere accuratamente puliti tra ogni paziente. Seguire le procedure previste dal responsabile per la pulizia e la disinfezione in ospedale ed il reparto.

Ispezionare tutte le parti per usura e resistenza, prima e dopo la pulizia.

Di seguito è riportato un elenco di agenti di pulizia e disinfezione consigliati da Kanmed. Utilizzo di altri agenti e/o pulizia troppo aggressiva può ridurre la durata di alcune o di tutte le parti. Contattare Kanmed per le specifiche del prodotto in caso di dubbio.

Le pareti laterali sono realizzate in PET (eco-friendly) e in grado di resistere a tutti i tipi di liquidi per la pulizia e disinfezione.

Non usare candeggina e solventi.

Pulizia: Usare a acqua e sapone

Disinfezione: Il lettino Kanmed BabyBed resiste ai disinfettanti per superfici più comuni usati negli ospedali. Si possono usare anche le salviette disinfettanti con Virkon®, Diversey Limpiador Clorado, Clinell wipes, Chlor Clean wipes, Meliseptol® rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® e similari.

In caso di dubbio provare prima su una piccola superficie o contattare il proprio distributore o Kanmed.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

5.1 Pulizia del letto

Il Lettino e gli accessori devono essere accuratamente puliti tra ogni paziente. Seguire le procedure previste dal responsabile per la pulizia e la disinfezione in ospedale ed il reparto.

5.2 Pulizia della Cassetteria

La cassetteria è normalmente amovibile. Può essere sollevata per facilitare la pulizia della cassetteria e del lettino.



5.3 Pulizia delle pareti laterali

Rimozione delle pareti laterali:

Premete i fermi rossi verso l'interno per sbloccare e sollevare la parete laterale.

Non lavare le pareti laterali in lavastoviglie.

Non graffiare le pareti laterali con materiale abrasivo.

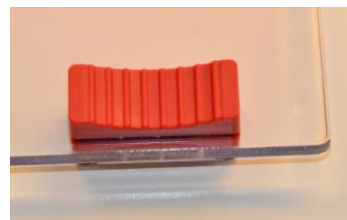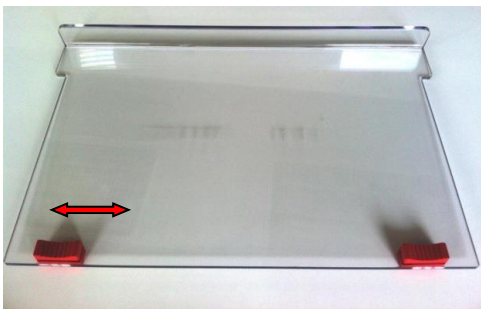

5.4 Riposizionare le spondine laterali

Fare scorrere le spondine laterali in posizione e spingere verso l'esterno le levette di blocco di colore rosso.

Il bordo superiore curvo deve essere rivolto verso l'esterno.

5.6 Materassino

Utilizzare detergenti per superfici e disinfettanti consigliati da Kanmed.

5.7 Tenda

Per le istruzioni di lavaggio vedere l'etichetta.

In caso di contaminazione, la tenda può essere lavata a 90 ° C ma può essere causa di restringimento ed usura esteriore.

6 Controlli di sicurezza prima dell'uso

Generale

Assicurarsi che tutte le parti siano in buone condizioni e non mostrano scolorimento o crepe. Cambiare le parti che non sono in buone condizioni.

È inoltre necessaria la manutenzione annuale. Vedere la sezione tecnica

Controlli consigliati prima dell'uso	Eseguiti da	Quando	Informazioni aggiuntive
Funzione delle pareti laterali	Utilizzatore	Prima di ogni uso	Assicurarsi che si muovano in su e giù facilmente e che si blocchino nella posizione alta.
Inclinazione	Utilizzatore	Prima di ogni uso	Assicurarsi che si muova liberamente e sia stabile in qualsiasi angolazione desiderata.
Cavi e connettori	Utilizzatore	Ogni giorno	Assicurarsi che siano in buone condizioni.
Stabilità e integrità	Utilizzatore	Ogni giorno	Assicurarsi che il letto sia in buone condizioni e stabile e che tutte le parti funzionino correttamente
Kanmed BabyWarmer	Utilizzatore		Vedere il manuale del Kanmed BabyWarmer
Ruote/freni	Utente	Prima di ogni utilizzo.	

7 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Intervento
La colonna di sollevamento non si muove come desiderato. (non per BB300,301 e BB400F, 401F))	Mancanza rete	Controllare i cavi. Controllare la presa di corrente
	Qualcosa ne ostacola il movimento	Controllare che nulla la blocchi
	Collegamento elettrico rotto o non collegato correttamente	Chiamare il Servizio Tecnico
	Pedale difettoso o cavo non collegato	Chiamare il Servizio Tecnico
Non è possibile inclinare correttamente il letto. Si blocca nella posizione elevata. Non mantiene la posizione	Controllare se guasto o ha bisogno di regolazione	Chiamare il Servizio Tecnico
	Qualcosa ne ostacola il movimento	Controllare che nulla lo blocchi
Letto instabile	Viti o ruote allentate	Chiamare il Servizio Tecnico
La regolazione in altezza produce rumori insoliti		Chiamare il Servizio Tecnico
Le pareti laterali sono difficili da spostare.	Non sono state montate correttamente	Verificare il corretto montaggio e aggiungere grasso

8 Dati Tecnici

	BB100 / 101 Standard BB300 / 301 Standard altezza fissa		BB400 / 401 Gemellare BB400F / 401F Gemellare altezza fissa	
Dimensioni	Con barre laterali L 85cm, P 63mm	Senza barre laterali L 83cm, P 53mm	Con barre laterali L 95cm, P 80mm	Senza barre laterali L 93cm, P 70mm
Piano letto Dimensioni interne	L690mm P465mm H90 mm Realizzato in PP		L765mm P640mm H90mm Realizzato in PP	
Altezza dal pavimento del letto	Min. 78 cm Max. 108 cm. Altezza fissa 80cm Ordinando le ruote doppie da 9,5 cm, l'altezza dei letti si abbassa di 4 cm			
Peso	Circa 46 kg Altezza fissa circa 36 kg		Circa 52kg Altezza fissa circa 42 kg	
Base carrello	64 cm X 87 cm			
Ruote	Diametro 125mm con freni o 9,5 cm per le ruote doppie con freno			
Inclinazione	Circa 17 gradi		Circa 17 gradi	
Materassino	Morbida schiuma rivestito		Morbida schiuma rivestito	
Tenda	Lavabile 60°C (90°C)		Lavabile 60°C (90°C)	
Cassettiera	L320mm P330mm H120mm, Coperchio 320x330mm			
Colori	Azzurro unisex per tutti i dettagli in plastica. Ruote e parti in metallo grigio chiaro			
Volt BB100/400	230V 50Hz / 60Hz o 115V 60Hz 150VA			
Potenza BB100/400				
Fusibili BB100/400	2xT6,3A 230V, Sostituire solo dello stesso tipo e valore			
Presenza di corrente sulla colonna BB100 e BB400:	Max. 300W			
Protezione BB100/400:	Classe I			

Modifiche AVVERTENZA	Eventuali modifiche su Kanmed BabyBed compresi accessori fatti in casa, possono annullare totalmente le responsabilità di Kanmed e non sono autorizzate senza l'approvazione scritta di Kanmed.
Creazione di sistema	Chiunque colleghi Kanmed BabyBed a qualsiasi altra presa di rete di altri sistemi può aver creato un "sistema", secondo IEC 60601-1 paragrafo 16, e deve essere qualificato per valutare eventuali conseguenze che potrebbero danneggiare il personale, pazienti e attrezzature.
Vita attesa	Kanmed garantisce una vita di 10 anni in sicurezza dal primo giorno di utilizzo. Questo a condizione che Kanmed BabyBed sia stato utilizzato in base al manuale d'uso o di servizio e che l'unità non sia stata manomessa o modificata in alcun modo e per nessun motivo.

I prodotti sono marcati CE.

In conformità al UL 60601-1

Dati ambientali

In uso: +10 a + 40°C, <85% RH

Trasporto: -20 a +60°C, senza condensa.

Stoccaggio: +10 a +40°C, senza condensa.

Pressione atmosferica: 70 a 106 kPa

9 Sezione Tecnica – Assistenza e Manutenzione

NOTA: Tutti i ricambi utilizzati per la sostituzione o la riparazione devono essere forniti da Kanmed o dal suo distributore autorizzato. L'uso di "parti non autorizzate da Kanmed" graveranno automaticamente tutte le responsabilità di sicurezza sull'ospedale. Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato, ingegnere biomedico o equivalente. Non eseguire nessun intervento tecnico con il paziente nel letto.

9.1 Controllo annuale / manutenzione

Controllare quanto segue, almeno una volta l'anno:

- Che cavi e connettori siano privi di difetti.
- Controllare le pareti laterali per crepe o danni.
- Controllare gli Angoli - crepe nella plastica, le viti sono serrate? Nota, viti speciali di plastica.
- Controllare le guide delle pareti laterali se necessario in base al modello posseduto.
- Verificare che le pareti laterali si abbassino e si sollevino senza problemi e sia facile rimuoverle.
- Verificare che il pedale per il controllo dell'altezza del letto risponda al comando, che la funzione di sollevamento e abbassamento funzioni correttamente e che non faccia nessun rumore insolito quando in uso e che il cavo non sia danneggiato.
- Verificare che la funzione di inclinazione funzioni correttamente. Non dovrebbe fare nessun rumore.
- Verificare che la maniglia ed il filo di comando dell'inclinazione non siano danneggiati.
- Controllare che le ruote non siano danneggiate in alcun modo e siano serrate al carrello, che scorrano senza rumore e che la funzione di freno delle ruote funzioni correttamente.
- Verificare che tutte le viti siano ben serrate, in particolare le viti che collegano la colonna per regolazione dell'altezza alla base del carrello, le viti sulla parte superiore della colonna e le viti che fissano la base del letto al pistone per l'inclinazione.
- Verificare che l'etichetta del Pedale non sia rovinata
- Verificare che le etichette sulla vassoio del lettino non siano usurate.

Service

NOTA

Scollegare sempre l'alimentazione prima di eseguire riparazioni sul BabyBed. Eseguire sempre un test di funzionamento completo dopo ogni riparazione.

9.2 Regolazione della funzione inclinazione

Se il letto è a inclinazione a comando meccanico fare riferimento alla versione 1 di questo manuale per informazioni di Service. Disponibile sul sito www.kanmed.se.

L'aggiornamento a inclinazione con comando idraulico è un'operazione semplice - contattate il vostro distributore.

Premendo il tasto si attiva il perno di sblocco che si trova nella parte superiore della molla dall'interno del pistone a gas.

Se l'inclinazione non è attivabile o se il pistone a gas non la può fermare in posizione è necessario regolarne la funzione.

Rilasciare il pistone a gas dalla staffa sulla colonna e rilasciare il dado di bloccaggio sulla testa di rilascio (vedi foto)

Inclinazione non regolabile: Girare la molla a gas di un giro – inserire il pistone a gas nella staffa e spingere nell'aggancio.

Provare che ora si muova liberamente e che ne blocchi la posizione quando si rilascia il pulsante. Se non è sufficiente aggiungere un giro.

L'inclinazione non si blocca in posizione: Girare la molla a gas in senso inverso e provare.

Fare un controllo finale quindi serrare i bulloni ed il dado di bloccaggio



9.2.1 Regolare il limite di inclinazione.

Il limite di inclinazione può essere regolato spostando la staffa di supporto del pistone sulla colonna. Assicurarsi di fissarlo correttamente
E' disponibile un kit per modificare il range di inclinazione del letto a ± 17 gradi

9.3 Cambiare o regolare un Angolo delle Barre Laterali

Vedere l'elenco dei pezzi di ricambio per i codici d'ordinazione. Ogni Angolo delle Barre Laterali è avvitato da sotto con due (2) viti in plastica speciale. I fori del letto sono ovali per permettere una perfetta regolazione delle Barre Laterali e delle Pareti Laterali. Si consiglia di rimuovere le viti a 2 Angoli per montare nuovi Angoli o Barre Laterali.
Non utilizzare altre viti oltre alle Kanmed cod.700-0880 perché non avranno abbastanza capacità di tenuta. Una vite può essere avvitata e svitata circa 6 volte nello stesso foro di plastica.

9.4 Aggiungere, rimuovere o regolare le Cassettiere o le Mensole

Allentare le viti del supporto della Cassettera. Spostarlo nella nuova posizione e serrare le viti in modo adeguato. (se necessario rimuovere il nastro decorativo di plastica nero)
Per rimuovere o aggiungere una Cassettera supplementare: Sollevare la colonna di almeno 5 cm. Premere verso il basso la guarnizione di plastica nera che gira intorno alla parte inferiore della colonna. Ora è possibile rimuovere i perni di serraggio o aggiungere perni di serraggio.
Quando si aggiunge una Cassettera verificare che possa essere abbassata a sufficienza la paretina frontale.
Per meglio adattare, tagliare il nastro decorativo di plastica nero. Un nuovo nastro può essere ordinato a Kanmed

9.5 Cambiare il Comando a Pedale / connessioni elettriche

Sdraiare con cura il letto su un fianco. Scollegare il pedale dalla Colonna. Svitare il Pedale e sostituirlo. Sollevare il letto e controllare le funzioni e che le frecce su / giù indichino la direzione corretta.

9.5 1 Aggiungere un altro pedale o un pedale frontale.

Contattare Kanmed per le parti necessarie e le istruzioni.

9.6 Sostituire la Colonna

Sollevare la colonna elettricamente di circa 5 cm, se possibile.
Scollegare la corrente.
Svuotare il letto e rimuovere le Pareti Laterali ed il piano del letto.
Rimuovere le cassette. Premere verso il basso la guarnizione in plastica nella parte inferiore della colonna. Rimuovere le strisce di plastica in modo che sia possibile rimuovere i perni metallici che agganciano gli accessori alla Colonna. Se la Colonna non può muoversi, allora dovrete ordinare nuovi perni metallici.
Rimuovere il Pistone a Gas dalla Colonna così come il suo supporto.
Allentare i bulloni che fissano il piano del letto. Questi due bulloni sono serrati e bloccati e per sbloccarli sono necessari strumenti di qualità e forza. Controllare il cavo di terra.
Allentare le viti sulla parte superiore della Colonna per rimuovere la staffa del letto. Controllare il cavo di terra sul lato inferiore.
Scollegare il controllo dell'altezza.
Rovesciare la Colonna/Letto a testa in giù.
Svitare i perni di connessione dei nodi equipotenziali di messa a terra. (Solo per i modelli più vecchi)
Rimuovere il cavo di terra di protezione sotto il letto. (Solo per i modelli più vecchi)
Allentare le viti sotto il carrello e rimuovere il Comando a Pedale.
Svitare la Colonna. Controllare il cavo di terra
Per l'assemblaggio - eseguire le istruzioni in ordine inverso.
Effettuare un controllo del funzionamento completo e un test di sicurezza elettrica per garantire che il piano del letto sia correttamente messo a terra.

10 Accessori/Parti di Ricambio

Part no	Descrizione	Dettagli
BB-112	Kit per il montaggio del BW3 al disotto del lettino	Di serie sui nuovi lettini.
800-0077	Parete Laterale sinistra/destra BB100/BB300	23 cm altezza
800-0076	Parete Laterale frontale BB100/BB300	23 cm altezza
800-0010	Parete Laterale posteriore BB100/BB300	23 cm altezza, con passa cavi
800-0101	Parete Laterale destra/sinistra BB101/BB301	Altezza 25 cm
800-0100	Parete laterale frontale BB101/BB301	Altezza 25 cm
800-0105	Parete laterale posteriore BB101/BB301	Altezza 25 cm, con passacavi
800-0079	Parete Laterale sinistra/destra BB400/400F	23 cm altezza
800-0078	Parete Laterale frontale BB400/400F	23 cm altezza
800-0042	Parete Laterale posteriore BB400/400F	23 cm altezza, con passa cavi
800-0107	Parete Laterale destra/sinistra BB401/401F	Altezza 25 cm
800-0108	Parete laterale frontale BB401/401F	Altezza 25 cm
800-0109	Parete Laterale posteriore BB401/401F	Altezza 25 cm, con passacavi
800-0072	Fermi rossi.	Set di 4
800-0023	Barra Laterale front/post BB100/BB300	Lunghezza 400 mm
800-0022	Barra Laterale sinistra/destra BB100/BB300	Lunghezza 620 mm
800-0044	Barra Laterale front/post BB400/BB400F	Lunghezza 577 mm
800-0045	Barra Laterale sinistra/destra BB400/BB400F	Lunghezza 723 mm
800-0110	Angolo per BB100-BB400F	No Guida Parete Laterale
800-0098	Angolo per BB101-BB401	No Barra Laterale
700-0880	Viti per supporti Angoli	Usare solo queste viti speciali
BB155	Materasso BB100/BB300 68 cm x 46 cm	Schiuma rivestita
BB450	Materasso BB400/BB400F 76 cm x 64 cm	Schiuma rivestita
800-0004	Vassoio Letto BB100/BB300	
800-0041	Vassoio Letto BB400/BB400F	
800-0002	Cassettiera	
800-0013	Supporto Cassettiera	Include set di perni e viti
800-0001	Coperchio Cassettiera	
BB171	Supporto bottiglia	Non ancora disponibile
800-0020	Palo Tenda	Regolabile a due altezze
800-0063	Gancio/Maniglia per BW3	
800-0064	Gancio/Maniglia per BabyWarmer-50	Non ancora disponibile
800-0502	Cavo speciale alimentazione BabyWarmer	Lunghezza 80-100cm
800-0003	Wheel top Cover	
BB160	Tenda per BB100 / BB300	Verificare i colori disponibili con il fornitore o sulla homepage Kanmed www.kanmed.se
BB460	Tenda per BB400/400F	
800-0501	Comando a Pedale con cavo	
800-0029	Perni per accessori (Per essere fissati sulla Colonna)	Dia 7 mm, L 30 mm vite M5. Include le viti. Set di 2
800-0503	Etichette per il Vassoio Letto	
800-0501	Etichette per Comando a Pedale	
BB103	Kit Trendelemburg ±17 gradi	Nuova molla a gas e piastra superiore

NOTE: Sono disponibili molti altri ricambi e accessori. Si prega di verificare con il vostro fornitore locale o sulla pagina web Kanmed www.kanmed.se Contattate il fornitore per il listino prezzi.

11 Garanzia

Kanmed garantisce all'acquirente, per un periodo di **5 anni** data di consegna, che il Kanmed BabyBed sia privo di difetti nei materiali e nella lavorazione. La garanzia non si applica alle parti in plastica, materassi, cavi e tende.

L'unico obbligo di Kanmed rispetto a tale difetto è limitato alla riparazione con parti nuove o rigenerate o, a discrezione di Kanmed, alla sostituzione dell'apparecchiatura o al rimborso del prezzo di acquisto. Questa garanzia non si applica se il prodotto è stato modificato, aggiustato o riparato da altri oltre Kanmed o modificati, aggiustati o riparati da organismi autorizzati dal Kanmed non in conformità alle istruzioni scritte fornite da Kanmed. La garanzia non si applica se l'apparecchio è stato oggetto di uso improprio, negligenza o incidente.

Queste garanzie sono valide a condizione che venga tempestivamente notificato il difetto a Kanmed o ai suoi rivenditori autorizzati entro il periodo di garanzia.

Kanmed avrà il diritto esclusivo di determinare se esiste un difetto.

Kanmed non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di danni speciali o indiretti derivanti dalla violazione della garanzia, violazione del contratto, negligenza o qualsiasi altra teoria legale.

12 Compatibilità EMC

Il lettino è conforme ai requisiti applicabili di Compatibilità elettromagnetica (EMC) IEC 60601-1-2:2007.

Il lettino deve essere utilizzato in un ambiente ospedaliero, ma non vicino a attrezzature chirurgiche HF o macchine fotografiche MR.

AVVERTENZA: L'uso di accessori e cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore di questa apparecchiatura potrebbe comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di queste apparecchiature e provocare un funzionamento non corretto.

ATTENZIONE: apparecchiature di comunicazione RF portatili (ad esempio telefoni cellulari, trasmettitori radio, cavi dell'antenna e antenne esterne) dovrebbero essere utilizzate a una distanza di 30 cm (12 pollici) in qualsiasi parte del lettino, compresi i cavi specificati dal produttore. In caso contrario, si potrebbe provocare il degrado delle prestazioni di questo apparecchio.

NOTA: Le emissioni caratteristiche di questo dispositivo lo rendono adatto per l'impiego in aree industriali e negli ospedali (CISPR 11 Classe A). Se usato in ambienti residenziali (per il quale si richiede normalmente CISPR 11 Classe B) questa apparecchiatura potrebbe non offrire una protezione adeguata per i servizi di comunicazione a radiofrequenza. L'utente potrebbe aver bisogno di adottare misure di mitigazione, come ad esempio lo spostamento o l'orientamento dell'apparecchiatura.

Per maggiori informazioni sulla conformità EMC con emissioni specifiche e standard di immunità, livelli di test, ecc. contattare Kanmed.

13 Smaltimento



Quando il Kanmed BabyBed ha raggiunto la fine della sua vita, deve essere riciclato in conformità alla direttiva UE 2002/96/CE (RAEE), se applicabile.

KANMED° BABYBED



KANMED AB
Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden

Telephone +46 8 56 48 06 30
Telefax +46 8 56 48 06 39

E-Mail: info@kanmed.se
Home page: www.kanmed.se

Distribuito Italia da:

 **DI DEDDA**
elettromedical SRL
Via Resistenza,3 - 20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 4887 181 Fax +39 02 4570 8448
e-mail info@didedda.it web site didedda.it