

Luft- & syrgasblandare

KANMED
a MedCare Visions® company

Gasblandare Medel-, och högflödesblandare för barn och vuxna

Användningsområde

Precisionsblandare för luft och syrgas. Fungerar på de flesta enheter där andningsvård bedrivs, så väl inom pediatrik- och vuxenvård.

Flexibel

BIO-MED DEVICES gasblandare finns i många olika konfigurationer och kombineras efter behov.

- Flödesmätare med möjlighet till många olika flöden att välja på från 0 - 120 LPM (Högflödesblandare 15-120 LPM)
- Låg-, medel-, och högflödesblandare
- Möjlighet att stänga av bleedflödet på lågflödesblandarna och modell NEO2Blend och därmed spara gas och pengar
- Gasslangarna beställs i önskad längd och med rak eller vinklad hane

Larmfunktion

Blandaren har ett inbyggt ljudlarm som larmar vid tryckförändringar i någon av gaskällorna på mer än 20 psi (138 kPa) i förhållande till varandra.

Rengöring

Blandaren rengörs utvändigt med alkoholbaserad ytdesinfektion på en trasa eller duk. Blandarna får inte sprayas med eller sänkas ned i någon annan vätska. Se till att inga stora mängder alkohol kommer in i öppningar för larm eller ventiler.



2004F7015EU

Specifikationer	
Syrgas %	21 - 100% (steglös gradering med 10% intervall)
Antal portar	1-3 beroende på configuration
Syrgasnoggrannhet	+/- 3% av hela intervallet
Flödesmätare	Kalibrerade för 60 PSI
Flödet i flödesmätarna ställs in med hjälp av kulans centrum	
Storlek (ca)	9,2 x 13,7 x 11,7 cm
Vikt kg (ca)	1,5 kg
Garanti	1år
Enhetsspecifika standarder	Certifierad enligt ISO 11195: 1995, CE


* LPM= liter per minut



2002FP70



2013B

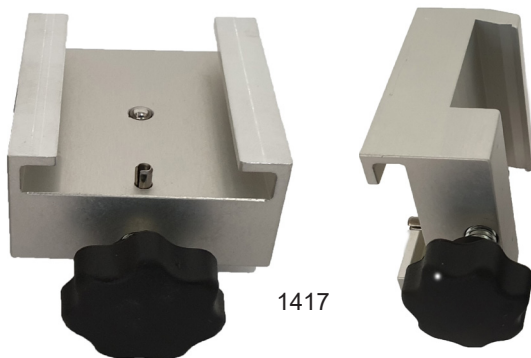

1417



2029+2022x20
2027+2025x20

Art nr	Beskrivning Blandare & Fästen	Flödesmätare LPM	
		vä	hö
2004F7015EU	Högflödesblandare, 70 & 15 LPM Flödesmätare	70	15
2002FP70	Högflödesblandare, 70 LPM Flödesmätare	70	-
1417	Klove, Universal med stort slitsfäste		
2013B	Fäste för montering på droppställing (25,4 mm)		



Art nr	Beskrivning Gasslangar	Anmärkning
2022	O ₂ slang per dm, beställ i valfri längd, pris per dm	Vid beställning av slang måste både artikelnummer för slangmontering och artikelnummer för val av slang beställas.
2028	Slangmontering inklusive O ₂ rak hane + NIST-koppling	
2029	Slangmontering inklusive O ₂ vinklad hane + NIST-koppling	
2025	LUFT slang per dm, beställ i valfri längd, pris per dm	Ange längd i dm= totalpris Ex: 2029 + 2022 x längd i dm (20 för 2m)
2026	Slangmontering inklusive LUFT rak hane + NIST-koppling	
2027	Slangmontering inklusive LUFT vinklad hane + NIST-koppling	